

# PFLEGE

## DER WINKELSTÜCKE



Die vollständigen Reinigungs- und Sterilisationsverfahren sind in der Bedienungsanleitung des Produkts beschrieben. Dieses Medizinprodukt wird „nicht steril“ ausgeliefert. Bitte stellen Sie sicher, dass vor der Verwendung des Instruments dieses Verfahren befolgt wird.

**Für implantologische und chirurgische Handstücke beachten Sie bitte die entsprechenden Bedienungsanleitungen.**

## ALLGEMEINER WARNHINWEIS

⊘ Das Instrument weder in ein NaCl-Bad noch einen Ultraschallreiniger geben.

## 1 VORBEREITUNG



### A. ENTFERNEN DES BOHRERS

- Entfernen Sie den rotierenden Bohrer aus dem Spannsystem.

## 2 VORREINIGUNG



### A. SPÜLEN DES INSTRUMENTS

- Reinigen Sie das Instrument aussen und innen unter Leitungswasser.



### B. ENTFERNEN VON SCHMUTZ/ABLAGERUNGEN

- Trocknen Sie die Düsen und dann den Rest des Instruments mit einer sterilen Vlieskompressе (fusselfreien Textilien).

## 3 DESINFIZIERUNG



### A. REINIGEN UND DESINFIZIEREN

- Tauchen Sie das Instrument in ein Bad mit einem Reinigungs-/Desinfektionsmittel.
- Bürsten Sie das Instrument mit einer glatten, flexiblen Bürste. VERWENDEN SIE KEINE Metallbürste.
- Spülen Sie das Instrument zweimal unter fließendem Leitungswasser ab.



### B. OPTIONAL: AUTOMATISCHES DESINFIZIEREN

- Führen Sie eine automatische Reinigung/Desinfizierung durch.\*\*
- Prüfen Sie nach der Reinigung/Desinfizierung, dass keine Reinigungsmittelrückstände vorhanden sind, und führen Sie gegebenenfalls eine zusätzliche Spülung durch.
- Prüfen Sie nach der Reinigung/Desinfizierung, ob das Instrument trocken ist. Trocknen Sie das Instrument gegebenenfalls manuell (siehe 4).


\*\*Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Herstellers

### 4 MANUELLE REINIGUNG UND TROCKNEN



#### C. REINIGEN UND TROCKNEN INNEN UND AUSSEN MIT SPRAYNET

- Schütteln Sie **Spraynet** vor der Verwendung.
- Wählen Sie die geeignete **Spraynet**-Düse ①\*
- Halten Sie die Spitze des Instruments nach unten gerichtet und schützen Sie sie mit einem sterilen Vliestuch.
- Betätigen Sie **Spraynet**.

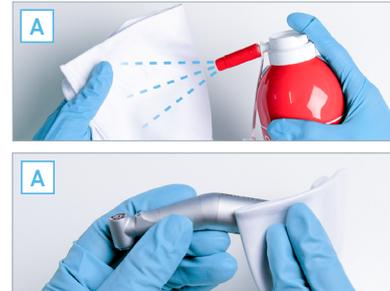

- Trocknen Sie das Äussere des Winkelstücks mit einem in **Spraynet** getränkten Tuch.

⚠ **Trocknen Sie das Instrument immer ab.**

### 5 SCHMIERUNG



#### A. SCHMIEREN MIT LUBRIFLUID

- Schütteln Sie **Lubrifluid** vor der Verwendung.
- Wählen Sie die **Lubrifluid**-Düse ①\*
- Halten Sie die Spitze des Instruments nach unten gerichtet und schützen Sie sie mit einem saugfähigen Tuch.
- Betätigen Sie **Lubrifluid**.

### 6 STERILISATION



#### B. WINKELSTÜCK IN EINEN STERILISATIONSBEUTEL GEBEN

#### C. GEMÄSS HERSTELLERANWEISUNGEN STERILISIEREN

- Nur Instrumente mit dem Symbol sind im Autoklaven sterilisierbar.

⚠ **Nur Instrumente sterilisieren, die ordnungsgemäss gereinigt, getrocknet und geschmiert wurden.**

\*Sämtliches Zubehör ist auf der letzten Seite des Dokuments aufgeführt.

Sie können die vollständige Anleitung hier herunterladen: <https://dental.bienair.com/ifu>

# PFLEGE- ZUBEHÖR



**SPRAYNET**  
Reinigungsspray 500 ml  
6er-Pack  
REF. 1600036-006



**LUBRIFLUID**  
Schmiermittel 500 ml  
6er-Pack  
REF. 1600064-006



**LUBRICARE 2**  
Pfleegerät  
REF. 1601156-001