

MANTENIMIENTO DE CONTRAÁNGULOS



Consulte las instrucciones de uso del producto para conocer los procedimientos completos de limpieza y mantenimiento de la esterilización. Este producto sanitario se suministra en estado «no estéril». Asegúrese de seguir este procedimiento antes de utilizar el dispositivo.

Para piezas de mano de implantología y cirugía, consulte las instrucciones de uso específicas

PRECAUCIÓN GENERAL

⊘ No sumerja el instrumento en baños de NaCl ni en baños de ultrasonidos.


1 PREPARACIÓN



A. RETIRADA DEL INSTRUMENTO

- Retire el instrumento rotativo del sistema de sujeción.

2 LIMPIEZA PREVIA

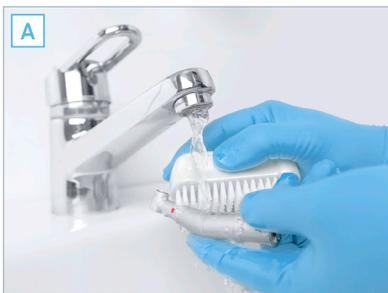

A. ENJUAGUE DEL DISPOSITIVO

- Limpie el exterior y el interior del dispositivo bajo el agua del grifo.



B. ELIMINACIÓN DE SUCIEDAD Y DEPÓSITOS

- Seque las boquillas y, a continuación, el resto del instrumento con una compresa estéril no tejida (telas que no desprendan pelusa).

3 DESINFECCIÓN



A. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Sumerja el dispositivo en un baño que contenga un limpiador/desinfectante.
- Cepille el dispositivo con un cepillito suave y flexible. NO UTILICE una escobilla de alambre.
- Enjuague el dispositivo dos veces con agua corriente del grifo.



B. OPCIONAL: DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA

- Efectúe el lavado o la limpieza/desinfección automática.**
- Después de la limpieza/desinfección, compruebe que no queden residuos de detergente y, si es necesario, vuelva a aclararlo.
- Después de la limpieza/desinfección, asegúrese de que el dispositivo quede seco. Si es necesario, seque el dispositivo manualmente (consulte el apartado 4).

**Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso del fabricante


MANTENIMIENTO DE CONTRAÁNGULOS

4 LIMPIEZA Y SECADO MANUALES



C. LIMPIEZA Y SECADO INTERNO Y EXTERNO CON SPRAYNET

- Agite el bote de Spraynet antes de usarlo.
- Seleccione la boquilla Spraynet apropiada ①*
- Mantenga la punta del instrumento apuntando hacia abajo y protéjala con un paño estéril no tejido.
- Active el Spraynet.

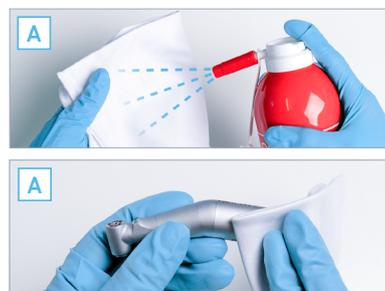

- Seque el exterior del contraángulo con un paño empapado en Spraynet.

⚠ Seque siempre el dispositivo.

5 LUBRICACIÓN



A. LUBRICACIÓN CON LUBRIFLUID

- Agite el bote de Lubrifluid antes de usarlo.
- Seleccione la boquilla Lubrifluid ①*
- Mantenga la punta del instrumento apuntando hacia abajo y protéjala con un paño absorbente.
- Active el Lubrifluid.

6 ESTERILIZACIÓN



B. INTRODUCCIÓN DEL CONTRAÁNGULO EN UNA BOLSA DE ESTERILIZACIÓN

C. ESTERILIZACIÓN CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE

- Solo pueden esterilizarse en autoclave los instrumentos marcados con el símbolo

⚠ Limpie, seque y lubrique siempre correctamente los instrumentos antes de esterilizarlos.

*Todos los anexos figuran en la última página de este documento.

Puede descargar las instrucciones completas en: <https://dental.bienair.com/ifu>

MANTENIMIENTO

ACCESORIOS



SPRAYNET
Spray de limpieza de 500 ml
Paquete de 6
REF. 1600036-006



LUBRIFLUID
Lubricante de 500 ml
Paquete de 6
REF. 1600064-006



LUBRICARE 2
Sistema de mantenimiento
REF. 1601156-001