


ENTRETIEN

DES CONTRE-ANGLES

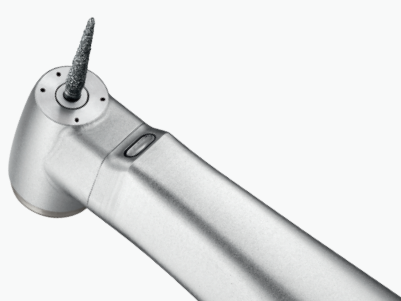

Pour obtenir les procédures complètes de nettoyage et stérilisation, veuillez consulter les instructions d'utilisation du produit. Ce dispositif médical est fourni non stérile. Veuillez vous assurer que la présente procédure est bien respectée avant toute utilisation du dispositif.

Pour les pièces à main d'implantologie et de chirurgie, veuillez consulter les instructions d'utilisation dédiées

MISE EN GARDE GÉNÉRALE

⚠ Ne pas immerger l'instrument dans un bain de chlorure de sodium (NaCl) ou dans un bain à ultrasons.


1 PRÉPARATION



A. DÉPOSE DE LA FRAISE

- Retirez la fraise rotative du système de serrage.

2 PRÉ-NETTOYAGE

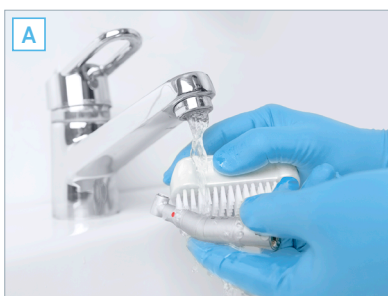

A. RINÇAGE DU DISPOSITIF

- Nettoyez l'extérieur et l'intérieur du dispositif à l'eau courante.



B. ÉLIMINATION DES SALISSURES/RÉSIDUS

- Séchez les buses puis le reste du dispositif à l'aide d'une compresse non tissée stérile (textile à faible peluchage).

3 DÉSINFECTION



A. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

- Plongez le dispositif dans un bain contenant un produit nettoyant/désinfectant.
- Brossez le dispositif à l'aide d'une brosse douce flexible. N'UTILISEZ PAS de brosse métallique.
- Rincez le dispositif à deux reprises à l'eau courante.



B. FACULTATIF : DÉSINFECTION AUTOMATIQUE

- Effectuez le nettoyage automatique avec une éventuelle phase de désinfection.**
- Après l'étape de nettoyage/désinfection, vérifiez l'absence de résidus de détergent et faites si nécessaire un rinçage supplémentaire.
- Vérifiez que le dispositif est sec après l'étape de nettoyage/désinfection. Si nécessaire, séchez manuellement le dispositif (cf. 4).

***Pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions d'utilisation du fabricant*

ENTRETIEN


DES CONTRE-ANGLES

4 NETTOYAGE ET SÉCHAGE MANUELS



C. NETTOYAGE (INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR) ET SÉCHAGE (EXTÉRIEUR) AVEC SPRAYNET

- Secouez **Spraynet** avant utilisation.
- Sélectionnez la buse **Spraynet** ① appropriée*
- Maintenez l'extrémité du dispositif vers le bas et protégez-la avec une compresse non tissée stérile.
- Actionnez **Spraynet**.

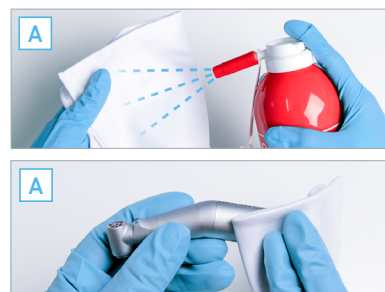

- Séchez l'extérieur du contre-angle à l'aide d'une compresse imbibée de **Spraynet**.

⚠ **Toujours sécher le dispositif.**

5 LUBRIFICATION



A. LUBRIFICATION AVEC LUBRIFLUID

- Secouez **Lubrifiuid** avant utilisation.
- Sélectionnez la buse **Lubrifiuid** ①*
- Maintenez l'extrémité du dispositif vers le bas et protégez-la avec une compresse absorbante.
- Actionnez **Lubrifiuid**.

6 STÉRILISATION



B. PLACEZ LE CONTRE-ANGLE DANS UN SACHET DE STÉRILISATION

C. STÉRILISEZ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- Seuls les dispositifs présentant le symbole  peuvent être stérilisés en autoclave.

⚠ **Stérilisez uniquement les dispositifs qui ont été correctement nettoyés, séchés et lubrifiés.**

*Tous les accessoires sont indiqués à la fin de ce document.

Les instructions complètes peuvent être téléchargées sur <https://dental.bienair.com/ifu>

ENTRETIEN

ACCESSOIRES



SPRAYNET
Spray de nettoyage 500 ml
Lot de 6
RÉF. 1600036-006



LUBRIFLUID
Lubrifiant 500 ml
Lot de 6
RÉF. 1600064-006



LUBRICARE 2
Système de maintenance
RÉF. 1601156-001