


维护

弯手机

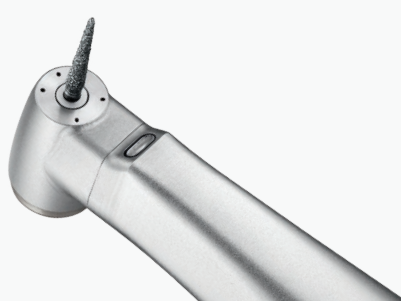

有关清洁、消毒和灭菌的完整维护程序，请参阅产品使用说明书。所提供的医疗器械均“未经消毒灭菌”。在使用器械之前，请确保遵循此程序。

对于种植和外科手机，请参考专用维护指南。

一般注意事项


⊘ 请勿将器械浸入生理盐水池中或使用超声波清洗机清洗。

1 准备工作




A. 拆卸车针
• 从手机机头取下车针。

2 初步清洁

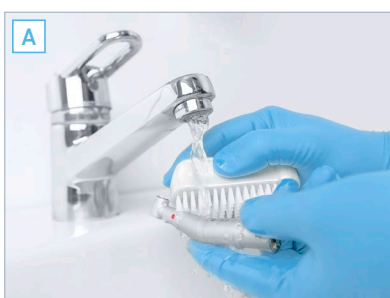

A. 冲洗器械
• 冲洗器械外部和内部。

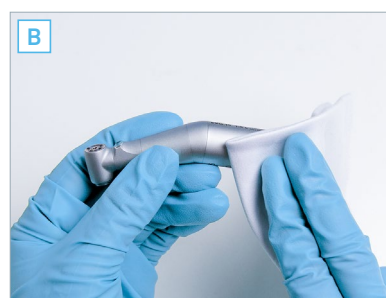

B. 表面擦拭
• 用无菌无纺布仔细擦干器械。

3 消毒



A. 清洁和消毒
• 将器械浸入含有清洁剂/消毒剂的池中。
• 用软毛刷刷洗器械。请勿使用钢丝刷。
• 冲洗器械两次。



B. 可选：自动消毒
• 进行自动清洗或清洁/消毒。^{**}
• 清洁/消毒后，检查是否有洗涤剂残留，如果需要，再进行一次冲洗。
• 清洁/消毒后，检查并确认器械干燥。如果需要，手动干燥器械（参见4）。


^{**}有关更多信息，请参阅制造商使用说明

4 手动清洁和干燥



C. 使用清洁剂 (SPRAYNET) 进行内部和外部清洁和干燥

- 使用前摇动清洁剂。
- 选择适当的清洁剂喷嘴①*
- 保持手机喷水孔朝下并用无菌无纺布保住机头。
- 按住清洁剂按钮1秒，喷入清洁剂。

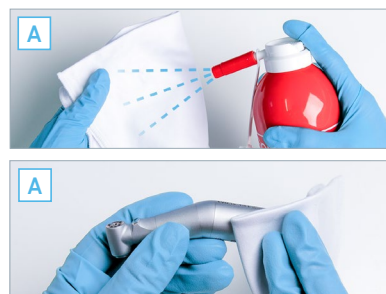

- 将清洁剂喷于无菌无纺布，仔细擦拭手机外部。

△ 始终擦干器械。

5 润滑



A. 使用润滑剂 (LUBRIFLUID) 润滑

- 使用前摇动润滑剂。
- 选择润滑剂喷嘴①*
- 保持手机喷水孔朝下并用无菌无纺布保住机头。
- 按住润滑剂按钮，喷入润滑剂1秒。

6 灭菌



- B. 将弯手机放入灭菌袋中密封。

C. 按照制造商的说明进行灭菌

- 只有带有^{135°C}符号的器械才能在高压灭菌器中进行灭菌。

△ 仅对已正确清洁、干燥和润滑的器械进行灭菌。

*所有附件均放在本文件的最后一页。

完整说明可从以下网址下载：<https://dental.bienair.com/ifu>

维护 附件



SPRAYNET
清洁剂
500ml/瓶, 6瓶/箱
订货编号: 1600036-006



LUBRIFLUID
润滑剂
500ml/瓶, 6瓶/箱
订货编号: 1600064-006



LUBRICARE 2
清洗注油机
订货编号: 1601156-001