

PFLEGE

DER TURBINEN



Die vollständigen Reinigungs- und Sterilisationsverfahren sind in der Bedienungsanleitung des Produkts beschrieben. Dieses Medizinprodukt wird „nicht steril“ ausgeliefert. Bitte stellen Sie sicher, dass vor der Verwendung des Instruments dieses Verfahren befolgt wird.

ALLGEMEINER WARNHINWEIS

⊘ Das Instrument weder in ein NaCl-Bad noch einen Ultraschallreiniger geben.

1 VORBEREITUNG



A. ENTFERNEN DES BOHRERS

- Entfernen Sie den rotierenden Bohrer aus dem Spannsystem.

2 VORREINIGUNG



A. SPÜLEN DES INSTRUMENTS

- Reinigen Sie das Instrument aussen und innen unter Leitungswasser.



B. ENTFERNEN VON SCHMUTZ/ABLAGERUNGEN

- Trocknen Sie die Düsen und dann den Rest des Instruments mit einer sterilen Vlieskompre (fusselfreien Textilien).

3 DESINFIZIERUNG



A. REINIGEN UND DESINFIZIEREN

- Tauchen Sie das Instrument in ein Bad mit einem Reinigungs-/Desinfektionsmittel.
- Bürsten Sie das Instrument mit einer glatten, flexiblen Bürste. VERWENDEN SIE KEINE Metallbürste.
- Spülen Sie das Instrument zweimal unter fließendem Leitungswasser ab.



B. OPTIONAL: AUTOMATISCHES DESINFIZIEREN

- Führen Sie eine automatische Reinigung/Desinfizierung durch.**
- Prüfen Sie nach der Reinigung/Desinfizierung, dass keine Reinigungsmittelrückstände vorhanden sind, und führen Sie gegebenenfalls eine zusätzliche Spülung durch.
- Prüfen Sie nach der Reinigung/Desinfizierung, ob das Instrument trocken ist. Trocknen Sie das Instrument gegebenenfalls manuell (siehe 4).


**Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Herstellers

4 MANUELLE REINIGUNG UND TROCKNEN



A. REINIGEN UND TROCKNEN INNEN UND AUSSEN MIT SPRAYNET

- Schütteln Sie **Spraynet** vor der Verwendung.
- Wählen Sie die geeignete **Spraynet-Düse** ①*
- Halten Sie die Spitze des Instruments nach unten gerichtet und schützen Sie sie mit einem sterilen Vliestuch.
- Betätigen Sie **Spraynet**.

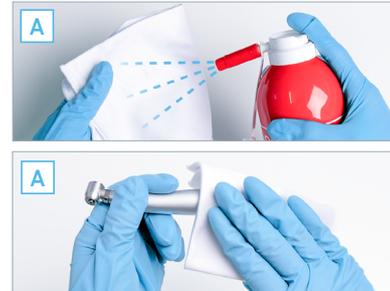


- Trocknen Sie das Äußere der Turbine mit einem in **Spraynet** getränkten Tuch.

⚠ **Trocknen Sie das Instrument immer ab.**

5 SCHMIERUNG

A. SCHMIEREN MIT LUBRIMED

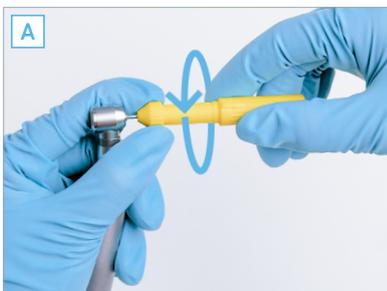

(Für Turbinen mit 2-/3-Loch- und 4-Loch-Anschluss siehe Kasten unten)

ODER B. SCHMIEREN MIT LUBRIFLUID



- Schütteln Sie **Lubrifluid** vor der Verwendung.
- Verwenden Sie den **Lubrifluid-Aufsatz** ①*
- Wählen Sie die geeignete **Lubrifluid-Düse** ②*
- Halten Sie die Spitze des Instruments nach unten gerichtet und schützen Sie sie mit einem saugfähigen Tuch.
- Betätigen Sie **Lubrifluid**.

PFLEGE DER TURBINEN

NUR FÜR TURBINEN MIT 2-/3-LOCH- UND 4-LOCH-ANSCHLUSS



**B': SCHMIEREN INNEN MIT LUBRIFLUID
NUR BEI TURBINEN MIT 2-/3-LOCH-
UND 4-LOCH-ANSCHLUSS**

- Verwenden Sie den Lubrifluid-Aufsatz ① *
- Wählen Sie die geeignete Lubrifluid-Düse ③ *
- Halten Sie die Spitze des Instruments nach unten gerichtet und schützen Sie sie mit einem saugfähigen Tuch; drücken Sie den Lubrifluid-Sprühknopf 1 Sekunde lang.

△ Sprühen Sie in die Öffnung wie in den Abbildungen für „2-/3-Loch-“ und „4-Loch-Anschluss“ gezeigt.

6 STERILISATION



A. TURBINE IN EINEN STERILISATIONSBEUTEL GEBEN



**B. GEMÄSS HERSTELLERANWEISUNGEN
STERILISIEREN**

- Nur Instrumente mit dem Symbol  sind im Autoklaven sterilisierbar.

△ Nur Instrumente sterilisieren, die ordnungsgemäss gereinigt, getrocknet und geschmiert wurden.


*Sämtliches Zubehör ist auf der letzten Seite des Dokuments aufgeführt.

Sie können die vollständige Anleitung hier herunterladen: <https://dental.bienair.com/ifu>


PFLEGE- ZUBEHÖR



SPRAYNET
Reinigungsspray 500 ml
6er-Pack
REF. 1600036-006

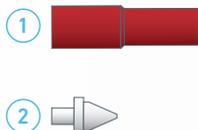

LUBRIFLUID
Schmiermittel 500 ml
6er-Pack
REF. 1600064-006

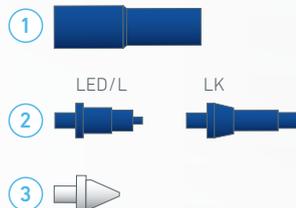

LUBRICARE 2
Pfleegerät
REF. 1601156-001



LUBRIMED
6er-Pack
REF 1600037-006