

MANUTENÇÃO DE TURBINAS




Consulte as instruções de utilização do produto para obter informações sobre os procedimentos completos de manutenção, limpeza e esterilização. Este dispositivo médico é fornecido "não esterilizado". Antes de utilizar o dispositivo, siga o presente procedimento.

PRECAUÇÕES GERAIS

⊘ Não mergulhe o instrumento num banho de NaCl nem num produto de limpeza ultrassônico.

2 PRÉ-LIMPEZA

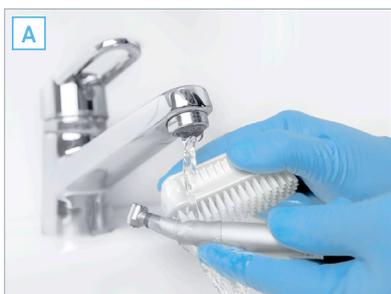

A. ENXAGUAMENTO DO DISPOSITIVO

- Limpe o exterior e o interior do dispositivo com água corrente.

1 PREPARAÇÃO



A. REMOÇÃO DA BROCA

- Retire a broca rotativa do sistema de fixação.



B. REMOÇÃO DE SUJIDADE/DEPÓSITOS

- Seque os bicos e, depois, o resto do instrumento com uma compressa de não tecido esterilizada (tecido que não largue pelo).

3 DESINFEÇÃO



A. LIMPEZA E DESINFEÇÃO

- Mergulhe o dispositivo num banho que contenha um produto de limpeza/desinfetante.
- Escove o dispositivo com uma escova macia e flexível. NÃO UTILIZE uma escova de arame.
- Enxágue o dispositivo duas vezes com água corrente.



B. OPCIONAL: DESINFEÇÃO AUTOMÁTICA

- Efetue uma lavagem ou limpeza/desinfecção automática.**
- Após a limpeza/desinfecção, assegure-se da ausência de resíduos de detergente e, se necessário, efetue um enxaguamento adicional.
- Após a limpeza/desinfecção, verifique se o dispositivo se encontra seco. Se necessário, seque manualmente o dispositivo (ver 4).

**Para mais informações, consulte as instruções de utilização do fabricante


MANUTENÇÃO DE TURBINAS

4 LIMPEZA E SECAGEM MANUAL



A. LIMPEZA E SECAGEM INTERNA E EXTERNA COM SPRAYNET

- Agite o Spraynet antes da utilização.
- Selecione o bocal Spraynet apropriado ①*
- Mantenha a ponta do instrumento virada para baixo e proteja-a com um pano de não tecido esterilizado.
- Ative o Spraynet.

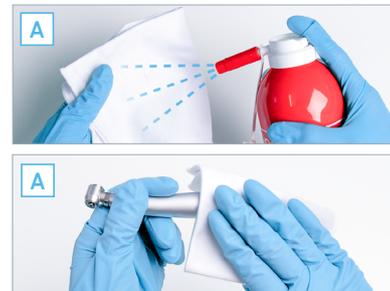

- Seque o exterior da turbina com um pano embebido em Spraynet.

⚠ Seque sempre o dispositivo.


5 LUBRIFICAÇÃO

A. LUBRIFICAÇÃO COM LUBRIMED



(Para as turbinas de 2/3 vias e 4 vias, consulte a caixa abaixo)

OU B. LUBRIFICAÇÃO COM LUBRIFLUID

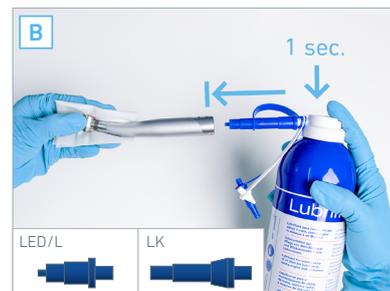

- Agite o Lubrifluid antes da utilização.
- Utilize o acessório Lubrifluid ①*
- Selecione o bocal Lubrifluid adequado ②*
- Mantenha a ponta do instrumento virada para baixo e proteja-a com um pano absorvente.
- Ative o Lubrifluid.

MANUTENÇÃO DE TURBINAS

APENAS PARA TURBINAS DE 2/3 VIAS E 4 VIAS



B'. LUBRIFICAÇÃO INTERNA COM LUBRIFLUID APENAS PARA TURBINAS DE 2/3 VIAS E 4 VIAS

- Utilize o acessório Lubrifluid ①*
- Selecione o bocal Lubrifluid adequado ③*
- Mantenha a ponta do instrumento virada para baixo e proteja-a com um pano absorvente; pressione o botão do Lubrifluid durante 1 segundo.

△ Pulverize para dentro da abertura, como indicado nas ilustrações "2/3 vias" e "4 vias".

6 ESTERILIZAÇÃO



A. COLOQUE A TURBINA NUM SACO DE ESTERILIZAÇÃO



B. ESTERILIZE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE

- Apenas os instrumentos com o símbolo  podem ser esterilizados em autoclave.

△ Esterilize apenas instrumentos que tenham sido devidamente limpos, secos e lubrificados.

*Todos os acessórios são mostrados na última página deste documento.


Pode transferir as instruções completas em: <https://dental.bienair.com/ifu>

MANUTENÇÃO


ACESSÓRIOS



SPRAYNET
Spray de limpeza 500 ml
Embalagem de 6 unidades
REF. 1600036-006

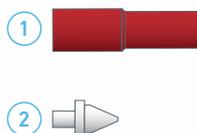

LUBRIFLUID
Lubrificante 500 ml
Embalagem de 6 unidades
REF. 1600064-006

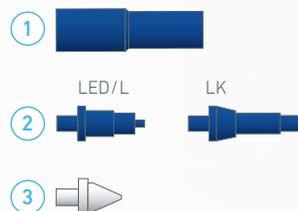

LUBRICARE 2
Sistema de manutenção
REF. 1601156-001



LUBRIMED
Embalagem de 6 unidades
REF. 1600037-006