



维护

— 手术和种植用低速手机

关于完整的清洁和灭菌维护程序, 请参见产品用户手册。本医疗设备交货时未消毒。使用设备前, 请确保根据此程序进行操作。

1 准备



A. 拆卸仪器

- 从车针上拆下旋转仪器
- 从马达上取下弯手机

B. 预消毒

- 外部消毒

⊗ 请勿将仪器浸入消毒剂清洗器中

2 清洁




A. 以 <math><38^{\circ}\text{C}</math> 的流水进行清洁

B. 清除污垢/沉积物

- 使用清洁探针仔细清除喷嘴上的所有污垢或沉积物
- 使用压缩空气干燥喷嘴, 然后用布擦干仪器的其余部分

⊗ 请勿将本器械浸入超声波清洗器中

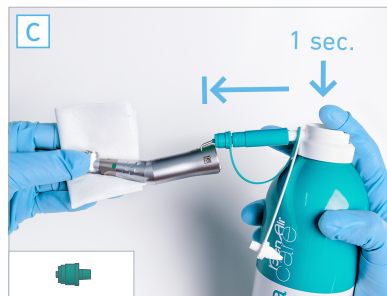

C. 通过防锈喷雾剂进行内部清洁

- 使用前, 请摇晃防锈喷雾剂
- 使用防锈喷雾剂附件 ①*
- 用软布包住手机, 机头向下; 按压防锈喷雾剂约 2 秒
- 使用防锈喷雾剂附件 ③*
- 用软布包住手机, 机头向下; 按压防锈喷雾剂约 1 秒



D. 使用清洁喷雾剂 (SPRAYNET) 进行内部和外部清洁

- 使用前, 请摇晃清洁喷雾剂 (Spraynet)
- 使用清洁喷雾剂 (Spraynet) 附件 ①*
- 用软布包住手机, 机头向下; 按压清洁喷雾剂 (Spraynet) 约 1 秒
- 使用浸有清洁喷雾剂 (Spraynet) 的布擦拭手机外表面

* 关于附件的所有产品编号, 请参见本文件尾页。

3 消毒



A. 使用表面消毒剂进行消毒

(按照制造商使用说明进行操作)

⊘ 请勿将仪器浸入消毒剂清洗器中

或

B. 高温消毒

(按照制造商使用说明进行操作)



4 润滑



A. 使用润滑喷雾剂 (LUBRIFLUID) 进行润滑

- 使用前, 请摇晃润滑喷雾剂 (Lubrifiuid)
- 请使用润滑喷雾剂 (Lubrifiuid) 附件 ①*
- 用软布包住手机, 机头向下; 按压润滑喷雾剂 (Lubrifiuid) 约 1 秒
- 然后, 在低速情况下运行 30 秒操作测试, 清除多余的润滑剂
- 立即存储: 机头向下放置, 以便残油流出

5 灭菌



A. 将弯手机置于灭菌袋中

B. 根据制造商说明进行灭菌


- 带有  符号的仪器可在高压灭菌器中灭菌

△ 只有经过清洁和润滑的仪器才能进行灭菌


维护 附件




清洁喷雾剂 (SPRAYNET)
500 ml
每箱 6 瓶
产品编号 1600036-006

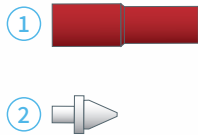

润滑喷雾剂 (LUBRIFLUID)
500 ml
每箱 6 瓶
产品编号 1600064-006

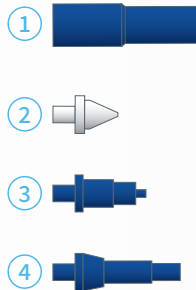

防锈喷雾剂
500 ml
每箱 6 瓶
产品编号 1600617-006

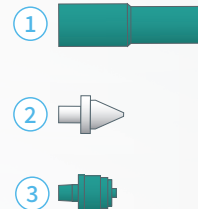

LUBRICARE 2
清洗注油机
产品编号 1601156-001



润滑脂 (LUBRIMED)
一包 6 支
产品编号 1600037-006



清洁探针
一包 10 个
产品编号 1000001-010