



# MANTENIMIENTO DE LOS CONTRA-ÁNGULOS Y LAS PIEZAS DE MANO DE CIRUGÍA E IMPLANTOLOGÍA.

Consulte el manual de uso del producto, en el que se describen los procedimientos completos de mantenimiento, limpieza y esterilización. Este producto sanitario se entrega «sin esterilizar». Antes de utilizarlo, familiarícese con el presente procedimiento.

## 1 PREPARACIÓN



### A. EXTRACCIÓN DEL VÁSTAGO


- Retire el instrumento rotativo del sistema de sujeción
- Desacople el contra-ángulo del motor

### B. DESINFECCIÓN PREVIA

- Desinfección externa

⊘ No sumerja el instrumento en un baño desinfectante.

## 2 LIMPIEZA

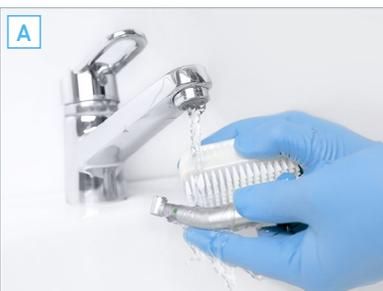

### A. LIMPIE CON AGUA CORRIENTE < 38 °C

### B. DESINCRUSTACIÓN / SÓLO PARA CA 1:2.5


- Elimine minuciosamente la suciedad y las posibles incrustaciones de las toberas con el desatascador de spray
- Seque las toberas con aire comprimido y el resto del instrumento, con un paño

⊘ No sumerja el instrumento en un baño de ultrasonidos



### C. LIMPIEZA INTERNA CON AQUACARE

- Agite el Aquacare antes del uso
- Utilice la boquilla Aquacare ①\*
- Sujete el instrumento con la cabeza hacia abajo protegido con un paño absorbente y accione la válvula del Aquacare durante dos segundos
- Utilice la boquilla Aquacare ③\*
- Sujete el instrumento con la cabeza hacia abajo protegido con un paño absorbente y accione la válvula del Aquacare durante un segundo

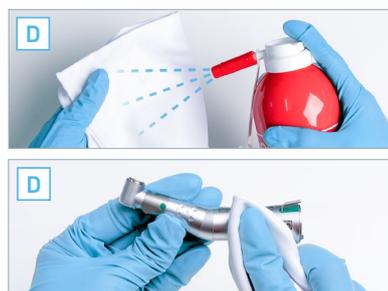

### D. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA CON SPRAYNET

- Agite el Spraynet antes del uso
- Utilice la boquilla Spraynet ①\*
- Sujete el instrumento con la cabeza hacia abajo protegido con un paño absorbente y accione la válvula del Spraynet durante un segundo
- Limpie el exterior del contra-ángulo con un paño humedecido con Spraynet

\* Todas las referencias de las boquillas se encuentran en la última página del documento.

## 3

## DESINFECCIÓN



## A. DESINFECCIÓN CON DESINFECTANTE DE SUPERFICIES

(siga las indicaciones de uso del fabricante)

⊘ No sumerja el instrumento en un baño desinfectante

o

## B. DESINFECCIÓN TÉRMICA

(siga las indicaciones de uso del fabricante)

## 4

## LUBRICACIÓN



## A. LUBRICACIÓN CON LUBRIFLUID

- Agite el Lubrifluid antes del uso
- Utilice la boquilla Lubrifluid ①\*
- Sujete el instrumento con la cabeza hacia abajo protegido con un paño absorbente y accione la válvula del Lubrifluid durante un segundo
- A continuación, realice una prueba de funcionamiento durante 30 s a baja velocidad para eliminar el posible exceso de lubricante
- Almacenaje inmediato: coloque los instrumentos con la cabeza hacia abajo para que los residuos de aceite puedan escurrirse

## 5

## ESTERILIZACIÓN



## A. COLOQUE EL CONTRA-ÁNGULO EN UNA BOLSITA DE ESTERILIZACIÓN

## B. ESTERILICE SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE

- Los instrumentos que llevan el símbolo  pueden esterilizarse en autoclave

⚠ No esterilice ningún instrumento que no haya sido limpiado y lubricado previamente

\* Todas las referencias de las boquillas se encuentran en la última página del documento.

# MANTENIMIENTO

## ACCESORIOS



**SPRAYNET**  
500 ml, spray de limpieza  
Embalaje de 6 unidades  
REF. 1600036-006



**LUBRIFLUID**  
500 ml, lubricante  
Embalaje de 6 unidades  
REF. 1600064-006



**AQUACARE**  
500 ml, spray de limpieza  
Embalaje de 6 unidades  
REF. 1600617-006



**LUBRICARE 2**  
Sistema de mantenimiento  
REF. 1601156-001



**LUBRIMED**  
Embalaje de 6 cartuchos  
REF. 1600037-006