



# MANUTENZIONE

## DI CONTRANGOLI E MANIPOLI PER CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA.

Riferirsi alle istruzioni per l'uso per le procedure complete di manutenzione, pulizia e sterilizzazione. Questo dispositivo medico è fornito «non sterile». Prima di utilizzarlo attenersi alla presente procedura.

### 1 PREPARAZIONE



#### A. ESTRAZIONE DELLA FRESA


- Togliere lo strumento rotante dal sistema di bloccaggio
- Staccare il contrangolo dal micromotore

#### B. PRE-DISINFEZIONE

- Disinfezione esterna

⊘ Non immergere lo strumento in un bagno disinfettante.

### 2 PULIZIA

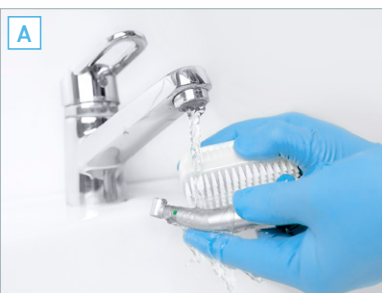


#### A. PULIRE CON ACQUA CORRENTE <38 °C

#### B. CURETTAGE / SOLO PER CA1:2.5

- Rimuovere accuratamente la sporcizia e gli eventuali depositi dagli ugelli con lo specchio
- Asciugare gli ugelli con aria compressa e il resto dello strumento con un panno

⊘ Non immergere in un bagno ad ultrasuoni

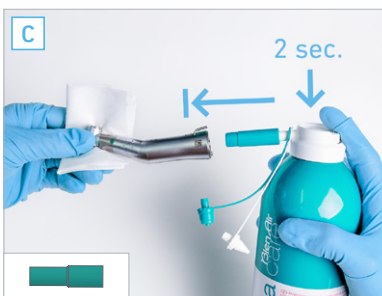

#### C. PULIZIA INTERNA CON AQUACARE

- Agitare il flacone Aquacare prima dell'uso
- Utilizzare la punta Aquacare ①\*
- Tenere lo strumento con la testa rivolta verso il basso protetta da un panno assorbente e premere il pulsante dell'Aquacare per 2 secondi
- Utilizzare la punta Aquacare ③\*
- Tenere lo strumento con la testa rivolta verso il basso protetta da un panno assorbente e premere il pulsante dell'Aquacare per 1 secondo



#### D. PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON SPRAYNET

- Agitare il flacone Spraynet prima dell'uso
- Utilizzare la punta Spraynet ①\*
- Tenere lo strumento con la testa rivolta verso il basso protetta da un panno assorbente e premere il pulsante dello Spraynet per 1 secondo
- Pulire l'esterno del contrangolo con un panno imbibito di Spraynet

\* Tutti i codici articolo delle punte sono riportati sull'ultima pagina del presente documento.

### 3 DISINFEZIONE



**A. DISINFEZIONE CON UN DISINFETTANTE PER SUPERFICI** (osservare le istruzioni per l'uso del produttore)

⊘ **Non immergere lo strumento in un bagno disinfettante.**

OPPURE

**B. TERMODISINFEZIONE**

(osservare le istruzioni per l'uso del produttore)

### 4 LUBRIFICAZIONE



**A. LUBRIFICAZIONE CON LUBRIFLUID**


- Agitare il flacone **Lubrifluid** prima dell'uso
- Utilizzare la punta **Lubrifluid** ①\*
- Tenere lo strumento con la testa rivolta verso il basso protetta da un panno assorbente e premere il pulsante del **Lubrifluid** per **1 secondo**
- Eseguire quindi una prova di funzionamento a bassa velocità per 30 secondi al fine di eliminare l'eventuale lubrificante in eccesso
- Stoccaggio immediato: riporre gli strumenti con la testa rivolta verso il basso affinché i residui di olio possano defluire.

### 5 STERILIZZAZIONE



**A. PORRE IL CONTRANGOLO IN UN SACCHETTO DI STERILIZZAZIONE**

**B. STERILIZZARE SEGUENDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE**

- Gli strumenti contrassegnati con il simbolo  sono sterilizzabili in autoclave

⚠ **Sterilizzare esclusivamente strumenti puliti e lubrificati**


\* Tutti i codici articolo delle punte sono riportati sull'ultima pagina del presente documento.

# MANUTENZIONE


## ACCESSORI




**SPRAYNET**  
 Spray per pulizia 500 ml  
 Confezione da 6 flaconi  
 ART. 1600036-006

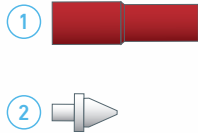

**LUBRIFIUID**  
 Lubrificante 500 ml  
 Confezione da 6 flaconi  
 ART. 1600064-006

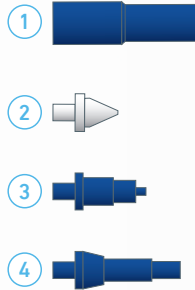

**AQUACARE**  
 Spray per pulizia 500 ml  
 Confezione da 6 flaconi  
 ART. 1600617-006

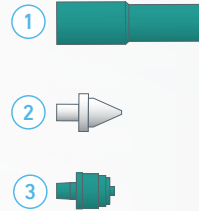

**LUBRICARE**  
 Sistema per la  
 manutenzione  
 ART. 1600915-001



**LUBRIMED**  
 Confezione da 6 cartucce  
 ART. 1600037-006



**SPECILLI**  
 Confezione da 10  
 ART. 1000001-010