



MANUTENZIONE

DI CONTRANGOLI E MANIPOLI PER CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA.

Riferirsi alle istruzioni per l'uso per le procedure complete di manutenzione, pulizia e sterilizzazione. Questo dispositivo medico è fornito «non sterile». Prima di utilizzarlo attenersi alla presente procedura.

1 PREPARAZIONE



A. ESTRAZIONE DELLA FRESA


- Togliere lo strumento rotante dal sistema di bloccaggio
- Staccare il contrangolo dal micromotore

B. PRE-DISINFEZIONE

- Disinfezione esterna

⊘ Non immergere lo strumento in un bagno disinfettante.

2 PULIZIA

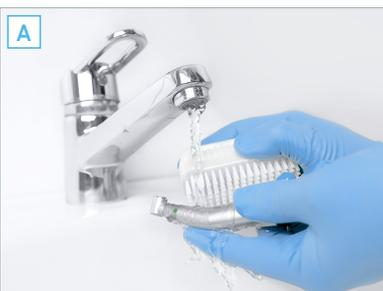

A. PULIRE CON ACQUA CORRENTE <38 °C

B. CURETTAGE / SOLO PER CA1:2.5

- Rimuovere accuratamente la sporcizia e gli eventuali depositi dagli ugelli con lo specillo
- Asciugare gli ugelli con aria compressa e il resto dello strumento con un panno

⊘ Non immergere in un bagno ad ultrasuoni



C. PULIZIA INTERNA CON AQUACARE

- Agitare il flacone Aquacare prima dell'uso
- Utilizzare la punta Aquacare ①*
- Tenere lo strumento con la testa rivolta verso il basso protetta da un panno assorbente e premere il pulsante dell'Aquacare per 2 secondi
- Utilizzare la punta Aquacare ③*
- Tenere lo strumento con la testa rivolta verso il basso protetta da un panno assorbente e premere il pulsante dell'Aquacare per 1 secondo




D. PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON SPRAYNET

- Agitare il flacone Spraynet prima dell'uso
- Utilizzare la punta Spraynet ①*
- Tenere lo strumento con la testa rivolta verso il basso protetta da un panno assorbente e premere il pulsante dello Spraynet per 1 secondo
- Pulire l'esterno del contrangolo con un panno imbibito di Spraynet

* Tutti i codici articolo delle punte sono riportati sull'ultima pagina del presente documento.

3 DISINFEZIONE

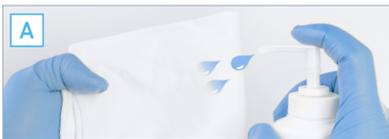

A. DISINFEZIONE CON UN DISINFETTANTE PER SUPERFICI

(osservare le istruzioni per l'uso del produttore)

- ⊘ Non immergere lo strumento in un bagno disinfettante.

OPPURE

B. TERMODISINFEZIONE

(osservare le istruzioni per l'uso del produttore)



4 LUBRIFICAZIONE



A. LUBRIFICAZIONE CON LUBRIFLUID

- Agitare il flacone Lubrifluid prima dell'uso
- Utilizzare la punta Lubrifluid ①*
- Tenere lo strumento con la testa rivolta verso il basso protetta da un panno assorbente e premere il pulsante del Lubrifluid per 1 secondo
- Eseguire quindi una prova di funzionamento a bassa velocità per 30 secondi al fine di eliminare l'eventuale lubrificante in eccesso
- Stoccaggio immediato: riporre gli strumenti con la testa rivolta verso il basso affinché i residui di olio possano defluire.

5 STERILIZZAZIONE



A. PORRE IL CONTRANGOLO IN UN SACCHETTO DI STERILIZZAZIONE

B. STERILIZZARE SEGUENDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE

- Gli strumenti contrassegnati con il simbolo  sono sterilizzabili in autoclave

- ⚠ Sterilizzare esclusivamente strumenti puliti e lubrificati

* Tutti i codici articolo delle punte sono riportati sull'ultima pagina del presente documento.

MANUTENZIONE

ACCESSORI



SPRAYNET
Spray per pulizia 500 ml
Confezione da 6 flaconi
ART. 1600036-006



LUBRIFLUID
Lubrificante 500 ml
Confezione da 6 flaconi
ART. 1600064-006



AQUACARE
Spray per pulizia 500 ml
Confezione da 6 flaconi
ART. 1600617-006



LUBRICARE 2
Sistema per la manutenzione
ART. 1601156-001



LUBRIMED
Confezione da 6 cartucce
ART. 1600037-006



SPECILLI
Confezione da 10
ART. 1000001-010