



メンテナンス

外科手術およびインプラント用W コントラアングルおよびハンドピース

メンテナンス、洗浄、滅菌の全手順については製品の使用上の注意事項をご参照ください。機器は「滅菌されていない」状態で納入されます。ご使用になる前に本説明書の手順に従って適切な処理を行ってください。

1 準備



A. バーの取外し

- バーをコントラアングルヘッドから取り外します。
- コントラアングルをモータから取り外します。

B. 予備消毒

- 外部の消毒

⊗ **インストゥルメントを消毒槽に浸けないでください。**

2 洗浄



A. 38℃以下の流水でコントラアングルの外部を柔らかいブラシなどで洗浄してください。

B. 汚れ等の除去

- スプレーノズルからの汚れを掃除用ワイヤ針を使用して丁寧に取り除いてください。
- ノズルを圧縮空気で吹き飛ばし、それ以外の部分は布で水分を拭き取ってください。

⊗ **超音波洗浄は行わないでください。**



C. アクアケアによる洗浄

- 使用する前にアクアケアをよく振ります。
- アクアケアのアタッチメントノズル ① を使用します。*
- 吸収性のある布でインストゥルメントのヘッド部を保護し、下向きに保持してハンドピース内部にアクアケアを約2秒間スプレーします。
- 次にアクアケアのアタッチメントノズル ③ を使用してスプレーノズル内を約1秒間スプレーします。*



D. スプレーネットによる内側と外側の洗浄

- 使用する前にスプレーネットをよく振ります。
- スプレーネットのアタッチメントノズル ① を使用します。*
- 吸収性のある布でインストゥルメントのヘッド部を保護し、下向きに保持してスプレーネットで約1秒間スプレーします。
- スプレーネットを含ませた布でコントラアングルの外部を拭き取ります。

* エンドピースの全製品番号は本書の最終ページに記載されています。

3 消毒



A. 消毒剤による表面の消毒

(製造メーカーの取扱説明にしたがってください。)

❌ **インスツルメントを消毒槽に浸けしないでください。**

または

B. 熱水洗浄器による洗浄

(製造メーカーの取扱説明にしたがってください。)



4 潤滑



A. ルブリフルイドによる潤滑

- 使用する前にルブリフルイドをよく振ります。
- ルブリフルイドのアタッチメントノズル ① を使用します。*
- 吸収性のある布でインスツルメントのヘッド部を保護し、下向きに保持してルブリフルイドで約1秒間注油します。
- 低速で30秒間、から回しを行い、余分な潤滑剤を取り除きます。
- 保管する場合はインスツルメントのヘッド部を下向きに置き、オイルの残りが落ちるようにします。

5 滅菌



A. コントラアングルを滅菌パックの中に入れます。

B. 製造メーカーの取扱説明にしたがって滅菌します。

-  の記号が付いているインスツルメントはオートクレーブ滅菌可能です。


⚠ **洗浄および潤滑したインスツルメント以外は滅菌しないでください。**

* エンドピースの全製品番号は本書の最終ページに記載されています。


メンテナンス 付属品




スプレーネット
クリーニングスプレー 500 ml
1箱6本入
製品番号 1600036-006

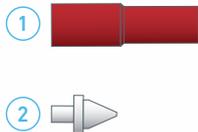

ルブリフルイド
潤滑剤 500 ml
1箱6本入
製品番号 1600064-006

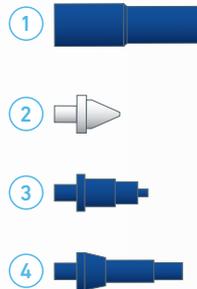

アクアケア
クリーニングスプレー 500 ml
1箱6本入
製品番号 1600617-006

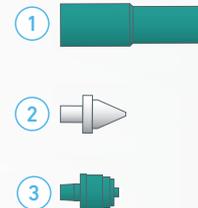

ルブリメド
1箱6カートリッジ入
製品番号 1600037-006