



MANUTENÇÃO

DOS CONTRA-ÂNGULOS E PEÇAS DE MÃO DE CIRURGIA E IMPLANTOLOGIA.

Consulte o manual de utilização do produto para obter informações sobre os procedimentos completos de manutenção, limpeza e esterilização. Este dispositivo médico é fornecido "não esterilizado". Antes de ser utilizado, siga o presente procedimento.

1 PREPARAÇÃO



A. REMOÇÃO DO INSTRUMENTO


- Retire o instrumento rotativo do sistema de fixação
- Desacople o contra-ângulo do motor

B. PRÉ-DESINFECÇÃO

- Desinfecção externa

⊘ Não mergulhar o instrumento num banho desinfetante.

2 LIMPEZA

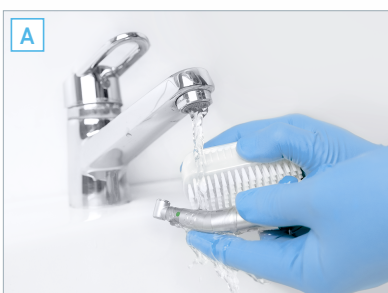


A. LIMPE COM ÁGUA CORRENTE <38 °C

B. REMOÇÃO DA SUJIDADE / SOMENTE PARA CA 1:2.5

- Elimine minuciosamente a sujeira e eventuais depósitos dos bicos, com recurso ao desentupidor de spray
- Seque os bicos com ar comprimido e o restante instrumento com um pano

⊘ Não mergulhar num banho ultrassónico

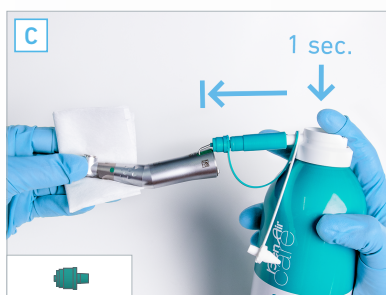

C. LIMPEZA INTERNA COM AQUACARE

- Agite o Aquacare antes da utilização
- Utilize o bocal Aquacare ①*
- Segure o instrumento com a cabeça virada para baixo, protegida por um pano absorvente, e acione o botão do Aquacare durante 2 segundos
- Utilize o bocal Aquacare ③*
- Segure o instrumento com a cabeça virada para baixo, protegida por um pano absorvente, e acione o botão do Aquacare durante 1 segundo



D. LIMPEZA INTERNA E EXTERNA COM SPRAYNET

- Agite o Spraynet antes da utilização
- Utilize o bocal Spraynet ①*
- Segure o instrumento com a cabeça virada para baixo, protegida por um pano absorvente, e acione o botão do Spraynet durante 1 segundo
- Limpe o exterior do contra-ângulo com um pano embebido em Spraynet

* Todas as referências dos bocais constam da última página do documento.

3 DESINFEÇÃO



A. DESINFEÇÃO COM DESINFETANTE DE SUPERFÍCIES

(respeitar as indicações de utilização do fabricante)

⊘ Não mergulhar o instrumento num banho desinfetante

OU

B. DESINFEÇÃO TÉRMICA

(respeitar as indicações de utilização do fabricante)

4 LUBRIFICAÇÃO



A. LUBRIFICAÇÃO COM LUBRIFLUID


- Agite o Lubrifluid antes da utilização
- Utilize o bocal Lubrifluid ①*
- Segure o instrumento com a cabeça virada para baixo, protegida por um pano absorvente, e acione o botão do Lubrifluid durante 1 segundo
- Em seguida, efetue um teste de funcionamento durante 30 s, a baixa velocidade, para eliminar o eventual excesso de lubrificante
- Armazenamento imediato: posicione os instrumentos com a cabeça virada para baixo, para que os resíduos de óleo possam escorrer

5 ESTERILIZAÇÃO



A. COLOQUE O CONTRA-ÂNGULO NUMA SAQUETA DE ESTERILIZAÇÃO

B. ESTERILIZE DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DO FABRICANTE

- Os instrumentos com o símbolo  podem ser esterilizados em autoclave

⚠ Esterilizar apenas instrumentos limpos e lubrificados


* Todas as referências dos bocais constam da última página do documento.

MANUTENÇÃO


ACESSÓRIOS




SPRAYNET
500 ml spray de limpeza
Embalagem de 6 unidades
REF. 1600036-006

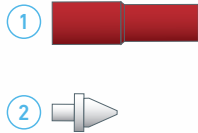

LUBRIFLUID
500 ml lubrificante
Embalagem de 6 unidades
REF. 1600064-006

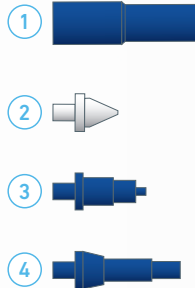

AQUACARE
500 ml spray de limpeza
Embalagem de 6 unidades
REF. 1600617-006

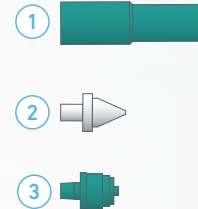

LUBRICARE 2
Sistema de manutenção
REF. 1601156-001



LUBRIMED
Embalagem de 6 aplicadores
REF. 1600037-006



DESENTUPIDOR DE SPRAY
Embalagem de 10 unidades
REF. 1000001-010