

MANUTENZIONE

DEI MICROMOTORI CON CARBONCINI MC2 E MC3.



Riferirsi alle istruzioni per l'uso per le procedure complete di manutenzione, pulizia e sterilizzazione. Questo dispositivo medico è fornito «non sterile». Prima di utilizzarlo attenersi alla presente procedura.

1 PREPARAZIONE



A. STACCARE IL CAVO DEL MICROMOTORE

B. ESTRARRE LA CALOTTA


2 PULIZIA



A. PULIZIA ESTERNA

- Pulizia esterna con Spraynet

3 DISINFEZIONE

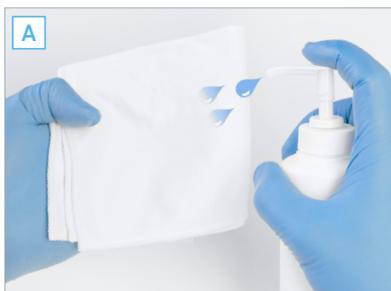

A. DISINFEZIONE CON UN DISINFETTANTE PER SUPERFICI (osservare le istruzioni per l'uso del produttore)

- ⊘ Non immergere lo strumento in un bagno disinfettante

4 STERILIZZAZIONE



A. PORRE LA CALOTTA DEL MICROMOTORE IN UN SACCHETTO DI STERILIZZAZIONE

B. STERILIZZARE SEGUENDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE

- Gli strumenti contrassegnati con il simbolo  sono sterilizzabili in autoclave

MANUTENZIONE

ACCESSORI



SPRAYNET

Spray per pulizia 500 ml
Confezione da 6 flaconi
ART. 1600036-006



LUBRIFLUID

Lubrificante 500 ml
Confezione da 6 flaconi
ART. 1600064-006



AQUACARE

Spray per pulizia 500 ml
Confezione da 6 flaconi
ART. 1600617-006



LUBRICARE 2

Sistema per la manutenzione
ART. 1601156-001



LUBRIMED

Confezione da 6 cartucce
ART. 1600037-006



SPECILLI

Confezione da 10
ART. 1000001-010