

MANUTENÇÃO

DOS MICROMOTORES COM ESCOVAS MC2 E MC3.



Consulte o manual de utilização do produto para obter informações sobre os procedimentos completos de manutenção, limpeza e esterilização. Este dispositivo médico é fornecido "não esterilizado". Antes de ser utilizado, siga o presente procedimento.

1 PREPARAÇÃO



A. DESACOPLAR O MOTOR DO CABO

B. RETIRAR A COBERTURA


2 LIMPEZA



A. LIMPEZA EXTERNA

- Limpeza externa com Spraynet

3 DESINFEÇÃO

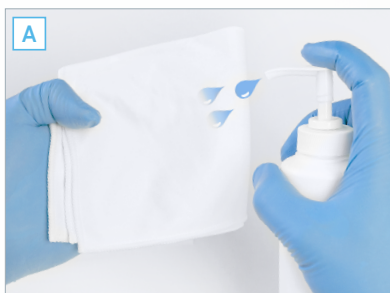

A. DESINFEÇÃO COM DESINFETANTE DE SUPERFÍCIES (respeitar as indicações de utilização do fabricante)


- ⊘ Não mergulhar o instrumento num banho desinfetante

4 ESTERILIZAÇÃO



A. COLOQUE A COBERTURA DO MOTOR NUMA SAQUETA DE ESTERILIZAÇÃO

B. ESTERILIZE DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DO FABRICANTE

- Os instrumentos com o símbolo  podem ser esterilizados em autoclave

MANUTENÇÃO

ACESSÓRIOS



SPRAYNET
500 ml spray de limpeza
Embalagem de 6 unidades
REF. 1600036-006



LUBRIFLUID
500 ml lubrificante
Embalagem de 6 unidades
REF. 1600064-006



AQUACARE
500 ml spray de limpeza
Embalagem de 6 unidades
REF. 1600617-006



LUBRICARE 2
Sistema de manutenção
REF. 1601156-001



LUBRIMED
Embalagem de 6 aplicadores
REF. 1600037-006



DESENTUPIDOR DE SPRAY
Embalagem de 10 unidades
REF. 1000001-010