


WARTUNG

DER KOLLEKTORLOSEN MIKROMOTOREN MCX LED UND MX2 LED



Die vollständigen Wartungs-, Reinigungs- und Sterilisationsverfahren entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Produkts. Dieses Medizinprodukt wird „nicht steril“ ausgeliefert. Halten Sie sich vor dessen Verwendung an das vorliegende Verfahren.


1 VORBEREITUNG UND REINIGUNG

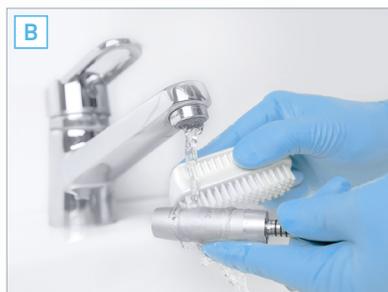

A. TRENNEN SIE DEN MOTOR VOM KABEL.

B. REINIGEN SIE DEN MOTOR UNTER FLIESSendem WASSER < 38°C.

2 DESINFIZIERUNG

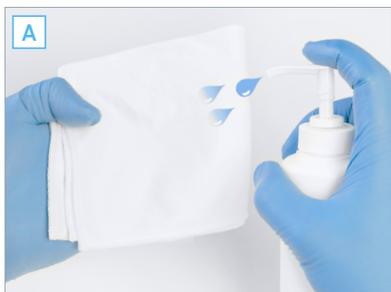

A. DESINFIZIERUNG MIT HILFE EINES FLÄCHENDESINFIZIATIONSMITTELS (Anwendungshinweise des Herstellers beachten)

⊘ Instrument nicht in ein Desinfektionsbad geben.

3 STERILISATION



A. LEGEN SIE DEN MOTOR IN EINEN STERILISATIONSBETTEL.

B. STERILISIEREN SIE GEMÄSS DEN HERSTELLERANWEISUNGEN.

- Instrumente mit dem Symbol  dürfen im Autoklav sterilisiert werden.

WARTUNG ZUBEHÖR



SPRAYNET
Reinigungsspray 500 ml
VPE zu 6 Flaschen
REF. 1600036-006



LUBRIFLUID
Schmiermittel 500 ml
VPE zu 6 Flaschen
REF. 1600064-006



AQUACARE
Reinigungsspray 500 ml
VPE zu 6 Flaschen
REF. 1600617-006



LUBRICARE 2
Pfleegerät
REF. 1601156-001



LUBRIMED
VPE zu 6 Patronen
REF. 1600037-006



SPRAYNADEL
VPE zu 10 Stück
REF. 1000001-010