


MANUTENZIONE

DEI MICROMOTORI AD INDUZIONE MCX LED E MX2 LED.



Riferirsi alle istruzioni per l'uso per le procedure complete di manutenzione, pulizia e sterilizzazione. Questo dispositivo medico è fornito «non sterile». Prima di utilizzarlo attenersi alla presente procedura.


1 PREPARAZIONE E PULIZIA

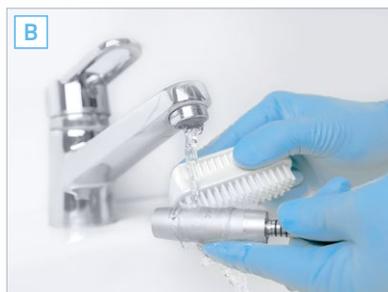

A. STACCARE IL CAVO DEL MICROMOTORE

B. PULIRE CON ACQUA CORRENTE <38 °C

2 DISINFEZIONE

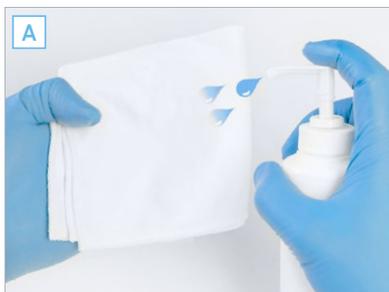

A. DISINFEZIONE CON UN DISINFETTANTE PER SUPERFICI (osservare le istruzioni per l'uso del produttore)

⊘ Non immergere lo strumento in un bagno disinfettante

3 STERILIZZAZIONE



A. PORRE IL MICROMOTORE IN UN SACCHETTO DI STERILIZZAZIONE

B. STERILIZZARE SEGUENDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE


- Gli strumenti contrassegnati con il simbolo  sono sterilizzabili in autoclave

MANUTENZIONE


ACCESSORI




SPRAYNET
 Spray per pulizia 500 ml
 Confezione da 6 flaconi
 ART. 1600036-006

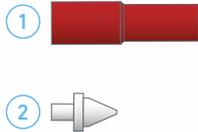

LUBRIFLUID
 Lubrificante 500 ml
 Confezione da 6 flaconi
 ART. 1600064-006

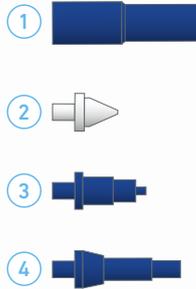

AQUACARE
 Spray per pulizia 500 ml
 Confezione da 6 flaconi
 ART. 1600617-006

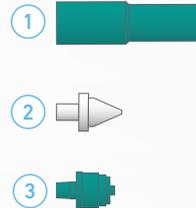

LUBRICARE
 Sistema per la
 manutenzione
 ART. 1600915-001



LUBRIMED
 Confezione da 6 cartucce
 ART. 1600037-006



SPECILLI
 Confezione da 10
 ART. 1000001-010