


MANUTENZIONE

DEI MICROMOTORI PER IMPLANTOLOGIA MX-i.

Riferirsi alle istruzioni per l'uso per le procedure complete di manutenzione, pulizia e sterilizzazione. Questo dispositivo medico è fornito «non sterile». Prima di utilizzarlo attenersi alla presente procedura.



1 PULIZIA

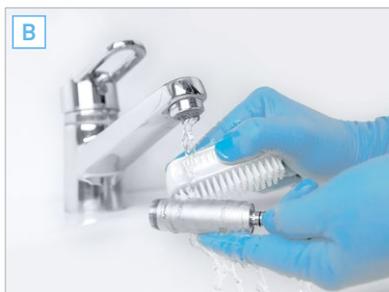

A. PULIZIA INTERNA

- Sciacquare l'interno del pezzo con acqua corrente <38 °C

B. PULIZIA ESTERNA

- Pulire l'esterno del pezzo con acqua corrente <38 °C

2 DISINFEZIONE



A. DISINFEZIONE CON UN DISINFETTANTE PER SUPERFICI (osservare le istruzioni per l'uso del produttore)

- ⊘ Non immergere lo strumento in un bagno disinfettante

OPPURE

B. TERMODISINFEZIONE

(osservare le istruzioni per l'uso del produttore)

3 STERILIZZAZIONE



A. PORRE IL MICROMOTORE IN UN SACCHETTO DI STERILIZZAZIONE

B. STERILIZZARE SEGUENDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE


- Gli strumenti contrassegnati con il simbolo  sono sterilizzabili in autoclave

MANUTENZIONE


ACCESSORI




SPRAYNET
Spray per pulizia 500 ml
Confezione da 6 flaconi
ART. 1600036-006

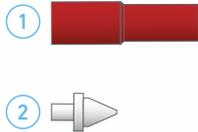

LUBRIFLUID
Lubrificante 500 ml
Confezione da 6 flaconi
ART. 1600064-006

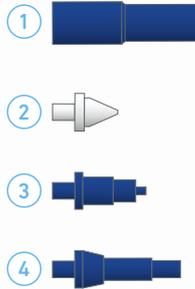

AQUACARE
Spray per pulizia 500 ml
Confezione da 6 flaconi
ART. 1600617-006

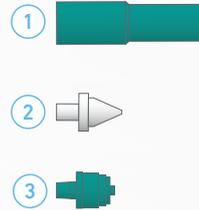

LUBRICARE
Sistema per la manutenzione
ART. 1600915-001



LUBRIMED
Confezione da 6 cartucce
ART. 1600037-006



SPECILLI
Confezione da 10
ART. 1000001-010