


# 维护

## — MX-i 种植手机



关于完整的清洁和灭菌维护程序, 请参见产品用户手册。本医疗设备交货时未消毒。使用设备前, 请确保根据此程序进行操作。

### 1 清洁

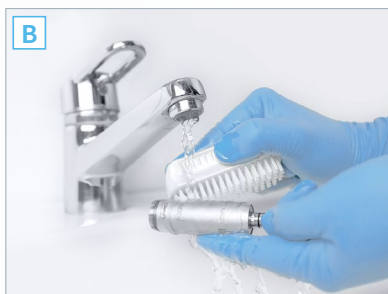

- A. 内部清洁**
- 在 <math>38^{\circ}\text{C}</math> 的流水下冲洗仪器内部
- B. 外部清洁**
- 在 <math>38^{\circ}\text{C}</math> 的流水下清洁仪器外部


### 2 消毒



- A. 使用表面消毒剂进行消毒 (按照制造商使用说明进行操作)**
- ⊘ 请勿将仪器浸入消毒剂清洗器中**
- 或
- B. 高温消毒 (按照制造商使用说明进行操作)**

### 3 灭菌



- A. 将马达置于灭菌袋中**
- B. 根据制造商说明进行灭菌**
- 带有  符号的仪器可在高压灭菌器中灭菌

# 维护 附件



清洁喷雾剂 (SPRAYNET)  
500 ml

每箱 6 瓶  
产品编号 1600036-006



润滑喷雾剂 (LUBRIFLUID)  
500 ml

每箱 6 瓶  
产品编号 1600064-006



防锈喷雾剂  
500 ml

每箱 6 瓶  
产品编号 1600617-006



LUBRICARE 2  
清洗注油机  
产品编号 1601156-001



润滑脂 (LUBRIMED)  
一包 6 支  
产品编号 1600037-006



清洁探针  
一包 10 个  
产品编号 1000001-010