

MANTENIMIENTO



DE LAS TURBINAS BIEN-AIR.

Consulte el manual de uso del producto, en el que se describen los procedimientos completos de mantenimiento, limpieza y esterilización. Este producto sanitario se entrega «sin esterilizar». Antes de utilizarlo, familiarícese con el presente procedimiento.

PREPARACIÓN






A. EXTRACCIÓN DEL VÁSTAGO

• Retire el instrumento rotativo del sistema de sujeción

B. DESINFECCIÓN PREVIA

- Desinfección externa
- No sumerja el instrumento en un baño desinfectante.

2 LIMPIEZA

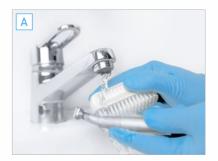



C 1 sec.



A. LIMPIE CON AGUA CORRIENTE < 38 °C

B. DESINCRUSTACIÓN

- Elimine minuciosamente la suciedad y las posibles incrustaciones de las toberas de spray con el desatascador de spray
- Seque las toberas con aire comprimido y el resto del instrumento, con un paño
- No sumerja el instrumento en un baño de ultrasonidos

C. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA CON SPRAYNET

- Agite el **Spraynet** antes del uso
- Utilice la boquilla Spraynet ①*
 (Para las turbinas de 2-3 y 4 orificios, consulte el recuadro de más abajo)
- Sujete el instrumento con la cabeza hacia abajo protegido con un paño absorbente y accione la válvula del **Spraynet** durante un segundo
- Limpie el exterior de la turbina con un paño humedecido con **Spraynet**

ÚNICAMENTE PARA LAS TURBINAS DE 2-3 Y 4 ORIFICIOS





C'. LIMPIEZA INTERNA CON SPRAYNET, ÚNICAMENTE PARA LAS TURBINAS DE 2-3 Y 4 ORIFICIOS

- Utilice la boquilla Spraynet 2*
- Sujete el instrumento con la cabeza hacia abajo protegido con un paño absorbente y accione la válvula del Spraynet durante un segundo

^{*} Todas las referencias de las boquillas se encuentran en la última página del documento.

В







- A. DESINFECCIÓN CON DESINFECTANTE DE SUPERFICIES (siga las indicaciones de uso del fabricante)
- O No sumerja el instrumento en un baño desinfectante

0

B. DESINFECCIÓN TÉRMICA

(siga las indicaciones de uso del fabricante)

LUBRICACIÓN







A. LUBRICACIÓN CON LUBRIMED

- **B.** LUBRICACIÓN CON LUBRIFLUID
- Agite el Lubrifluid antes del uso
- Utilice la boquilla **Lubrifluid** 2 3 o 4 según el tipo de instrumento* (Para las turbinas de 2-3 y 4 orificios, consulte el recuadro de más abajo)
- Sujete el instrumento con la cabeza hacia abajo protegido con un paño absorbente y accione la válvula del Lubrifluid durante un segundo
- A continuación, realice una prueba de funcionamiento durante 30 s a baja velocidad para eliminar el posible exceso de lubricante
- Almacenaje inmediato: coloque los instrumentos con la cabeza hacia abajo para que los residuos de aceite puedan escurrirse

ÚNICAMENTE PARA LAS TURBINAS DE 2-3 Y 4 ORIFICIOS





- B'. LUBRICACIÓN INTERNA CON LUBRIFLUID, ÚNICAMENTE PARA LAS TURBINAS DE 2-3 Y 4 ORIFICIOS
- Utilice la boquilla Lubrifluid 2 *
- Sujete el instrumento con la cabeza hacia abajo protegido con un paño absorbente y accione la válvula del Lubrifluid durante un segundo
- ⚠ Rocíe el spray dentro del orificio con arreglo a lo indicado en las ilustraciones «2-3 orificios» y «4 orificios»

ESTERILIZACIÓN





- A. COLOQUE LA TURBINA EN UNA BOLSITA DE **ESTERILIZACIÓN**
- B. ESTERILICE SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL **FABRICANTE**
- Los instrumentos que llevan el símbolo pueden esterilizarse en autoclave
- ⚠ No esterilice ningún instrumento que no haya sido limpiado y lubricado previamente

MANTENIMIENTO

Bien Air Dental

ACCESORIOS



SPRAYNET

500 ml, spray de limpieza Embalaje de 6 unidades REF. 1600036-006



Bora L/LK, Boralina, Prestige L/LK, Tornado L/LK



Black Pearl Eco de 3 y 4 orificios



LUBRIFLUID

500 ml, lubricante Embalaje de 6 unidades REF. 1600064-006



Bora L/LK, Boralina, Prestige L/LK, Tornado L/LK



Black Pearl Eco de 3 y 4 orificios



Bora L, Boralina, Prestige L, Tornado L, Boralina



Bora LK, Prestige LK, Tornado LK



AQUACARE

500 ml, spray de limpieza Embalaje de 6 unidades REF. 1600617-006



Bora L, Boralina, Prestige L, Tornado L



Black Pearl Eco de 3 y 4 orificios



Bora, Boralina, Prestige, Tornado



Sistema de mantenimiento REF. 1600915-001



LUBRIMED Embalaje de 6 cartuchos REF. 1600037-006



DESATASCADOR DE SPRAY Embalaje de 10 unidades REF. 1000001-010