


# Bien Air<sup>+</sup>

## Dental

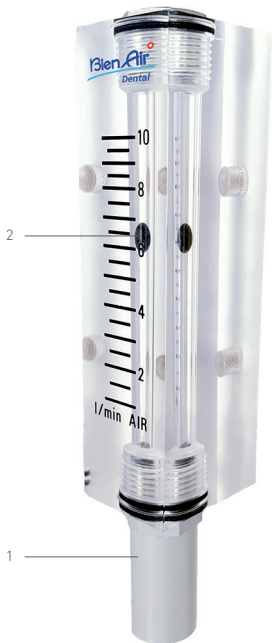

### SWITZERLAND

Headquarters  
Bien-Air Dental SA  
2500 Biemme 6, Switzerland  
Tel. +41 (0)32 344 64 64  
Fax +41 (0)32 344 64 91  
dental@bienair.com

### DEUTSCHLAND

Bien-Air Deutschland  
GmbH  
Jechtinger Straße 11  
79111 Freiburg, Germany  
Tel. +49 (0)761 45 57 40  
Fax +49 (0)761 47 47 28  
ba-d@bienair.com

### SPAIN

Bien-Air España S.A.U.  
Entença, 169 Bajos  
08029 Barcelona, Spain  
Tel. +34 934 25 30 40  
Fax +34 934 23 98 60  
ba-e@bienair.com

### ITALIA

Bien-Air Italia s.r.l  
Via Vaina 3  
20122 Milano, Italy  
Tel. +39 02 58 32 12 51  
Fax +39 02 58 32 12 53  
ba-i@bienair.com

### FRANCE

Bien-Air Europe Sàrl  
19-21, rue du 8 Mai 1945  
94110 Arcueil, France  
Tel. +33 (0)1 49 08 02 60  
Fax +33 (0)1 46 64 86 68  
ba-f@bienair.com

### UNITED STATES OF AMERICA

Bien-Air USA, Inc.  
Medical Technologies  
8861 Research Drive  
Irvine, CA 92618, USA  
Tel. +1 800-433-BIEN  
Tel. +1 949-477-6050  
Fax +1 949-477-6051  
ba-usa@bienair.com

### UNITED KINGDOM

Bien-Air UK Ltd  
Unit 19  
Crawley Business Centre  
Stephenson Way  
Three Bridges  
Crawley, RH10 1TN,  
England  
Tel. +44 (0)1293 550 200  
Fax +44 (0)1293 520 481  
ba-uk@bienair.com

### JAPAN

Bien-Air Asia Ltd.  
Nishi-Ikebukuro  
Daïichi-Seimei Bldg. 10F  
2-40-12 Ikebukuro,  
Toshimaku  
Tokyo, 171-0014, Japan  
Tel. +81 (3) 5954-7661  
Fax +81 (3) 5954-7660  
ba-asia@bienair.com

### CHINA

Beijing Bien-Air  
Medical Instrument  
Technology Service Co., Ltd  
Room 1415, Block B Lucky  
Tower,  
No.3 Dongsanhuan Beitou,  
Chaoyang District,  
Beijing 100027, China  
Tel. +86 10 6567 0651  
Fax +86 10 6567 8047  
ba-beijing@bienair.com

## Français

### Type:

Ce débitmètre REF 1600307 -001 permet de contrôler le débit d'air sur les moteurs Bien-Air Dental.

Il se place sur le nez du moteur (1). Le dispositif doit être tenu verticalement et la valeur se mesure au milieu de la bille (2) conformément au standard JIS B7551.

Les valeurs sont spécifiées dans les instructions d'utilisation des moteurs respectifs.

### Entretien:

À l'aide de détergeants ménagers et chiffons doux.

### Non stérilisable

## Deutsch

### Typ:

Dieser Durchflussmesser REF 1600307-001 gestattet die Überwachung des Luftdurchsatzes an den Bien-Air Dental Motoren.

Er wird auf die Motornase aufgestzt (1). Das Gerät muss senkrecht gehalten werden und der Wert wird gemäss der Norm JIS B7551 in der Kugelmitte gemessen (2).

Die Werte sind in den Betriebsanleitungen der jeweiligen Motoren angegeben.

### Wartung:

Anhand von Geschirrspülmitteln und weichen Lappen.

### Nicht sterilisierbar

## English

### Type:

This flowmeter REF 1600307-001 monitors the air flow on Bien-Air Dental motors.

It is placed on the tip of the motor (1). The device must be held vertically and the value is measured in the middle of the ball (2) according to standard JIS B7551.

The relevant values are specified in the instructions for use of the respective motors.

### Maintenance:

Using household detergents and soft cloths.

### Non-sterilisable

## Español

### Tipo:

Este caudalímetro REF 1600307-001 permite controlar el caudal de aire de los motores Bien-Air.

Se coloca en la nariz del motor (1). El dispositivo debe mantenerse en posición vertical, y el valor se mide en el centro de la bola (2) Dental según JIS B7551.

Los valores son indicados en las instrucciones de uso de los motores respectivos.

### Mantenimiento:

Con productos de limpieza doméstica y un trapo suave.

### No esterilizable

## Italiano

### Tipo:

Questo flussometro ART 1600307-001 permette di controllare il flusso d'aria sui motori Bien-Air Dental.

Si colloca sui naso del motore (1). Il dispositivo deve essere tenuto verticalmente e il valore si misura al centro della sfera (2) secondo lo standard JIS B7551.

I valori sono specificati nelle istruzioni per l'uso dei rispettivi motori.

### Manutenzione:

Con detersivi domestici e panni morbidi.

### Non sterilizzabile