

MICROMOTOR MCX LED e MCX



PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

Outros idiomas disponíveis em
<https://dental.bienair.com/IFU>

CE Rx Only
0123 REF 2100231-0008/2024.05

Conteúdo da embalagem (REF)



REF 1600751-001
MOT MCX LED



REF 1300967-003



REF 1600780-001
MOT MCX

Acessórios opcionais



REF 1600756-001
HOSE MCX GREY



REF 1600824-001
HOSE B-MCX GREY



REF 1300967-010
O-RING 8.1x0.73



REF 1600307-001
FLOWMETER



REF 1601081-001
HOSE MCX 400 GREY



REF 1601096-001
HOSE MCX GREY 400°
Ø20.2x40



REF 1600920-001
HOSE MCX GREY 2.2m



REF 1601141-001
TY MCX 400° gf.



REF 1600036-006
MAINT SPRAYNET

Índice

1	Símbolos	4	
1.1	Descrição dos símbolos utilizados	4	
2	Identificação e Utilização pretendida	5	
2.1	Identificação	5	
2.2	Utilização pretendida	5	
2.3	População-alvo de pacientes	5	
2.4	Utilizador pretendido	5	
2.5	Ambiente de utilização	5	
2.6	Condições médicas pretendidas	5	
2.7	Contraindicações para o paciente e efeitos secundários	5	
2.8	Em caso de acidente	5	
	Segurança do utilizador e do paciente: Advertências e precauções de utilização	6	
3.1	Instalação	7	
4	Descrição	8	
4.1	Visão global	8	
4.2	Montagem e preparação	9	
4.3	Dados técnicos	10	
4.4	Classificação	10	
4.5	Desempenhos	10	
4.6	Condições de funcionamento	10	
5	Manutenção e reparação	11	
5.1	Manutenção - Informações gerais	11	
5.1.1	Produtos de manutenção adequados	11	
5.2	Limpeza	12	
5.3	Desinfecção	13	
5.4	Esterilização	13	
5.4.1	Procedimento	14	
5.5	Lubrificação	14	
5.6	Embalagem e armazenamento	15	
5.7	Reparação	15	
6	Transporte e descarte	16	
6.1	Transporte	16	
6.2	Descarte	16	
7	Informações gerais	17	
7.1	Termos de garantia	17	
7.2	Referências	17	

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1 Símbolos

1.1 Descrição dos símbolos utilizados

Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
	Fabricante.		Número do catálogo.
	Marcação CE com o número da entidade notificada.		Número de série.
	ADVERTÊNCIA: perigo que pode resultar em ferimentos graves ou danos no dispositivo se as instruções de segurança não forem devidamente seguidas.		Dispositivo médico.
	ATENÇÃO: perigo que pode resultar em ferimentos leves ou moderados ou danos no dispositivo se as instruções de segurança não forem devidamente seguidas.		Representante CE autorizado na Comunidade Europeia.
	Usar luvas de proteção.		Lâmpada; luz, iluminação.
	Segurança elétrica. Parte aplicada tipo B.		Esterilizável num esterilizador a vapor (autoclave) à temperatura especificada.
	Advertência: em conformidade com as leis federais (EUA), este dispositivo apenas está disponível para venda mediante recomendação de um profissional de saúde acreditado.		Consulte as instruções de utilização ou consulte as instruções de utilização eletrónica.
	Código de matriz de dados para informações do produto incluindo UDI (identificação única do dispositivo).		Limite de temperatura.
	Limitação de humidade.		Limitação de pressão atmosférica.
	Manter afastado da chuva.		Símbolo geral para recuperação/reciclável.
	Materiais elétricos e eletrónicos recicláveis.		

2 Identificação e Utilização pretendida

2.1 Identificação

Dispositivo médico fabricado por Bien- Air Dental SA.

Tipo:

Micromotor elétrico esterilizável, sem escovas, com irrigação interna e luz LED para a referência 1600751-001.

Descrição:

Bien-Air Dental os micromotores foram concebidos para transformar a eletricidade em rotação mecânica para acionar peças retas e contra-ângulos odontológicos.

2.2 Utilização prevista

Produto destinado à utilização em odontologia geral que inclui odontologia restaurativa, profilaxia dentária e tratamentos ortodônticos.

2.3 População de pacientes pretendida

A população de pacientes pretendida do dispositivo inclui qualquer pessoa que visite um consultório dentário para receber tratamento, de acordo com a condição médica pretendida. Não existem quaisquer restrições relativas à idade, raça ou cultura da pessoa em questão. O utilizador pretendido é responsável por seleccionar o dispositivo adequado para o paciente de acordo com a aplicação clínica específica.

2.4 Utilizador previsto

Este produto destina-se a uma utilização exclusivamente profissional. Utilizado por dentistas e profissionais da odontologia..

2.5 Ambiente de utilização

Ambiente de instalações profissionais de saúde.

2.6 Condições médicas pretendidas

Odontologia geral que inclui odontologia restaurativa, profilaxia dentária, ortodontia e aborda a manutenção ou restabelecimento da saúde bucal..

2.7 Contraindicações e efeitos secundários para o paciente

Não existem quaisquer contraindicações, efeitos secundários nem advertências para o paciente específicas relativamente ao dispositivo quando o dispositivo é utilizado conforme pretendido.

2.8 Em caso de acidente

Em caso de acidente, o dispositivo não pode ser utilizado até à conclusão das reparações por um técnico qualificado e com formação adequada num centro autorizado pelo fabricante.

Em caso de acidentes graves relacionados com o dispositivo, informe uma autoridade competente no seu país, bem como o fabricante através do seu distribuidor regional. Respeite os regulamentos nacionais relevantes para procedimentos detalhados.



ADVERTÊNCIA

Qualquer utilização deste dispositivo para fins diferentes dos preconizados não está autorizada e pode ser perigosa.

3 Segurança do utilizador e do paciente: Advertências e precauções de utilização

Este dispositivo médico deve ser utilizado por profissionais em conformidade com as disposições legais em vigor em matéria de segurança, saúde e prevenção de acidentes de trabalho, bem como com as presentes instruções de utilização.

De acordo com estas disposições, o utilizador é responsável por garantir que só utiliza dispositivos que estejam em perfeito estado de funcionamento.

Segurança elétrica:



ADVERTÊNCIA

A segurança elétrica só pode ser garantida se o dispositivo for utilizado com motores e mangueiras de acionamento compatíveis com a Bien-Air Dental.

- Consulte sempre as instruções de utilização da cadeira odontológica ou do console para confirmar a compatibilidade com o dispositivo e a conformidade com a segurança elétrica.
- Quando utilizado com dispositivos médicos dentários Bien-Air, o dispositivo está em conformidade com a norma IEC 60601-1, à qual se aplicam os seguintes requisitos:
 - Proteção contra choques eléctricos
 - Entrada de líquidos
 - Proteção contra temperaturas excessivas e outros riscos de segurança.

Compatibilidade eletromagnética:



ADVERTÊNCIA

A compatibilidade eletromagnética só pode ser reivindicada quando o dispositivo é utilizado com motores e mangueiras de acionamento compatíveis com a Bien-Air Dental.

- Consulte sempre as instruções de utilização da cadeira odontológica ou do

console para confirmar a compatibilidade com o dispositivo e a conformidade

eletromagnética.

- Uma vez que a conformidade com a norma internacional IEC 60601-1-2 não garante imunidade contra 5G em todo o mundo (devido às diferentes bandas de frequência utilizadas localmente), evite a presença de dispositivos equipados com redes celulares de banda larga 5G no ambiente clínico ou certifique-se de que a funcionalidade de rede destes dispositivos está desactivada durante o procedimento clínico.
- Podem ocorrer perturbações magnéticas provocadas por outros dispositivos eletro-médicos; consulte as instruções de utilização da cadeira odontológica ou do console para obter informações sobre as especificações de CEM.

Para prevenir qualquer risco de explosão, atente às advertências abaixo:



ADVERTÊNCIA

De acordo com a norma IEC 60601-1:2005 +A12012/AnexoG, os dispositivos electrificados (motores, unidades de controle, acopladores e acessórios) só podem ser utilizados com segurança num ambiente médico em que são administradas ao doente misturas de substâncias anestésicas potencialmente explosivas ou inflamáveis se:

- A distância entre o motor e o circuito de respiração anestésico for superior a 25 cm;
- o motor não for utilizado em simultâneo com a administração de substâncias anestésicas ao doente.

Para prevenir qualquer risco de infecção, atente às advertências abaixo:



ADVERTÊNCIA

- O dispositivo é fornecido não esterilizado. Para evitar qualquer infeção, respeite o procedimento de limpeza, esterilização e manutenção descrito na capítulo 5.
- O profissional ou seu assistente que utiliza ou efetua a manutenção de dispositivos médicos contaminados ou potencialmente contaminados deve respeitar as precauções universais, nomeadamente a utilização de equipamento de proteção individual (luvas, óculos de proteção, etc.). Os instrumentos pontiagudos e cortantes devem ser

manuseados com muito cuidado.

- Coloque o dispositivo num apoio higienizável.

Para prevenir qualquer risco de sobreaquecimento do motor, atente às precauções abaixo:

 ATENÇÃO

- O motor tem de ser ligado ao sistema de arrefecimento de ar da cadeira odontoógica para evitar o sobreaquecimento e/ou a autolimitação da velocidade através do controle de segurança da placa eletrónica.
- Certifique-se sempre de que a mangueira do micromotor não está dobrada e que tanto a mangueira como o motor estão em boas condições.

Para prevenir qualquer risco de lesão e/ou danos materiais, atente às precauções abaixo:

 ATENÇÃO

Em caso de vibrações excessivas, aquecimento anormal, ruídos estranhos ou outros indícios que levem a supo.

- Esses dispositivos médicos devem ser usados a uma altura máxima de 1,5 m, para evitar danos em caso de queda.
- Nunca ligue um instrumento a um micromotor em funcionamento.
- Não pulverize qualquer lubrificante ou solução de limpeza no motor.
- Nunca umideça o dispositivo para esfriá-lo.
- É essencial utilizar ar comprimido seco e purificado na cadeira odontológica para garantir a longa vida útil do dispositivo. Mantenha a qualidade do ar e da água através da manutenção regular do compressor e dos sistemas de filtragem. A utilização de água dura não filtrada irá provocar o entupimento precoce dos tubos e conectores.

3.1 Instalação

 ADVERTÊNCIA

O micromotor apenas pode ser utilizado com dispositivos eletrónicos Bien- Air Dental ou compatíveis. Para cumprir os requisitos de segurança da norma IEC 60601- 1, apenas deve ser utilizada uma fonte de alimentação para dispositivos médicos com dois MOPP.



FIG. 1

4 Descrição

4.1 Visão global

FIG. 1

- (1) Nariz do motor
- (2) Corpo do motor
- (3) Ligação tubo/motor

Nota : As especificações técnicas, ilustrações e dimensões constantes das presentes instruções são fornecidas a título meramente indicativo. Estas não podem servir de fundamento para qualquer reclamação.

O idioma original das presentes instruções de utilização é o inglês.

Para qualquer informação adicional, contacte a Bien-Air Dental SA através do endereço indicado na contracapa.

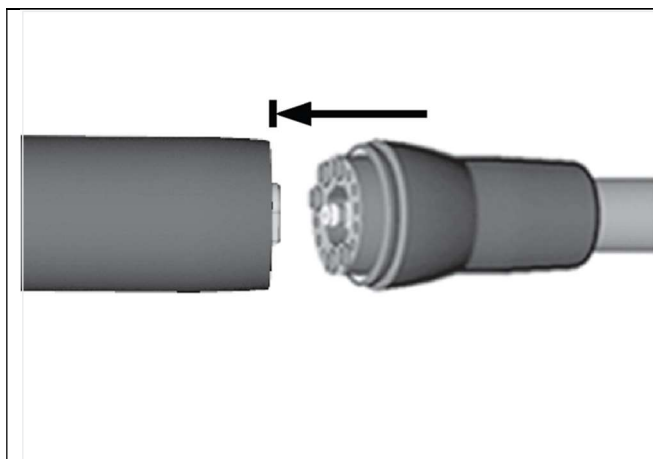


FIG. 2

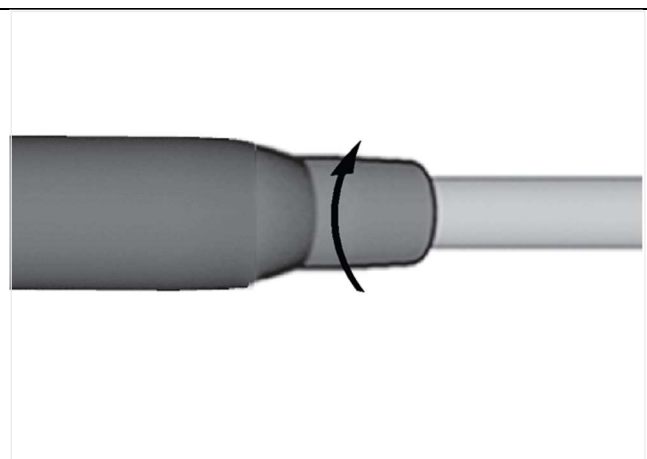


FIG. 3

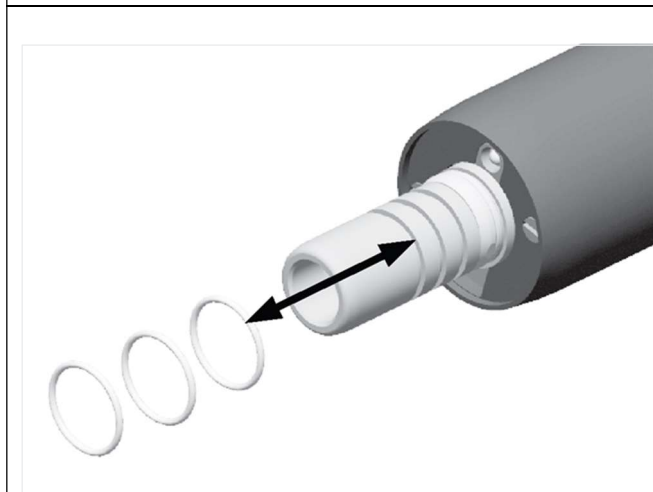


FIG. 4

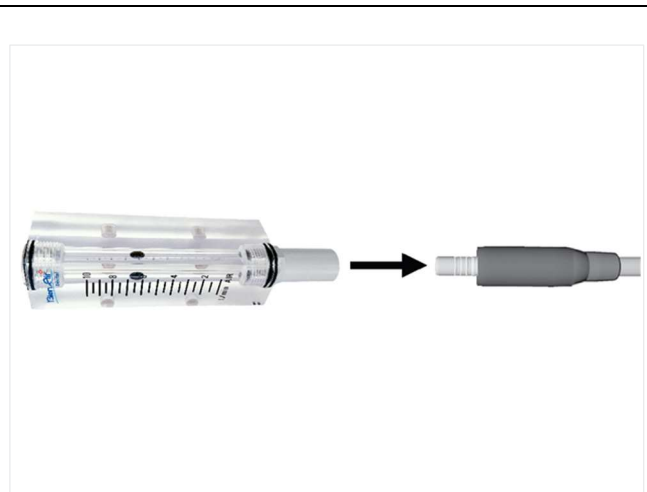


FIG. 5

4.2 Montagem e preparação

1. Ligue o motor a mangueira (com o conector tipo MCX) como indicado na FIG. 2.
2. Gire até encontrar a posição exata e empurre-o para dentro do motor.
3. Segurando o motor, rosqueie por completo o conector MCX à ligação traseira do motor FIG. 3.
4. Coloque o medidor de fluxo no acessório da extremidade e, em seguida, ative o ar de propulsão e medir o fluxo de ar. O valor é medido no meio da esfera do medidor de fluxo, de acordo com a norma JIS B7551. FIG. 5.
5. Se o fluxo de ar de propulsão não estiver no intervalo de 10 normlitros/min (+/-10%), ajuste a pressão do ar para atingir este nível.

Substituição manual dos anéis vedantes (não requer ferramentas) FIG. 4

- Não lubrifique o O-ring.
- Utilize apenas O-rings originais.
- Verifique que os O-rings não estão partidos nem cortados depois de os montar.

4.3 Dados técnicos

Fluxo de ar recomendado (medido na extremidade do motor)	10 NI/min (+/-10%)
Intervalo de pressão de ar	2,5 - 5 bar
Acoplamento	Nariz em conformidade com a norma ISO 3964*, tipo 3 curto.
Tempos de funcionamento	Sem limitações para o utilizador. Os tempos de funcionamento são impostos eletronicamente pelas placas de controlo Bien-Air, como uma função do binário aplicado.
Intervalo de velocidade de rotação	100 — 40 000 rpm
Direção de rotação	Sentido dos ponteiros do relógio e sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
Intensidade luminosa	LED, variável de 20 klux a 24 klux**
Faixa de pressão operacional do ar/água de pulverização	0 – 2.5 bar****
Consumo de ar de spray na pressão máxima de operação	3.5-5.6 NI/min****
Consumo de água do spray na pressão máxima de operação	86-145 ml/min****
Consumo de ar donspray na pressão operacional máxima	15-39 NI/min****
Tensão de alimentação (fornecida pelas placas eletrônicas da Bien-Air)	32 VDC*****
Corrente máxima (fornecida pelas placas eletrônicas da Bien-Air)	5 A*****
Maximum torque Torque máximo	22-27 mNm*****

**Motor is cooled via air, no water cooling. *O motor é resfriado a ar, sem resfriamento a água.*

***Compatível com peças manuais com dimensões “curta”, “média” e “longa”. The motor can be also safely connected with handpieces without optical fiber and/or without spray. O motor também pode ser conectado com segurança a peças de mão sem fibra óptica e/ou sem spray.*

****Medido em combinação com REF1601138-001 CA 1:5L NOVA MS*

*****Consulte as instruções de uso da peça de mão para definir as pressões de água e ar de spray adequadas, de acordo com a aplicação clínica. O motor resiste a pressões de até 3,75 bar sem vazamento ou explosão, de acordo com a norma ISO 14457. Os consumos máximos de ar e água são medidos sem a peça de mão conectada, enquanto os consumos mínimos são medidos em combinação com o contra-ângulo EVO.15 1:5 L.*

******As placas de controle eletrônico da Bien Air são protegidas contra sobretensão e*

subtensão: nenhum fusível está integrado ao motor. As placas eletrônicas da Bien Air devem ser alimentadas pela rede elétrica com frequência de 50 Hz/60 Hz.

ADVERTÊNCIA

A segurança elétrica só pode ser garantida quando o dispositivo é usado com placas de controle eletrônico compatíveis com a Bien-Air Dental.

Durante a integração, use somente uma fonte de alimentação médica que esteja em conformidade com as normas IEC 60601-1, respeitando a tensão suportável necessária.

4.4 Classificação

Classe IIa, em conformidade com o Regulamento Europeu de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745.

Dispositivo de classe II tipo B em conformidade com a norma IEC 60601-1.

4.5 Desempenhos

Desempenhos	
Dar velocidade e binário de acordo com a predefinição	Controlado eletronicamente
Precisão do valor da velocidade	+/- 5%

4.6 Condições de funcionamento

Condições de funcionamento	
	Intervalo de temperaturas: +10 °C - +35 °C (+50 °F - +95 °F)
	Intervalo de humidade relativa: 30% - 80%
	Intervalo de pressão de ar: 700 hPa - 1060 hPa



FIG. 6

5 Manutenção e reparação

5.1 Manutenção - Informações gerais

Limpe e esterilize o dispositivo antes da primeira utilização.

Num prazo máximo de 30 minutos após cada tratamento, limpe o motor. Este procedimento elimina quaisquer resíduos de sangue ou saliva.

ADVERTÊNCIA

Siga as diretivas, normas e diretrizes para recomendações de limpeza e esterilização em vigor no seu país.

ATENÇÃO

Não pulverize nenhum lubrificante ou solução de limpeza no motor. FIG. 6.

5.1.1 Produtos de manutenção adequados

Utilize exclusivamente produtos de manutenção e peças de origem da Bien-Air Dental SA ou recomendados pela Bien-Air Dental SA. A utilização de outros produtos ou peças pode provocar anomalias de funcionamento e/ou a anulação da garantia.

- Spraynet®
- Detergente alcalino ou detergente desinfetante (pH 8-11) recomendado para a limpeza/desinfecção de instrumentos odontológicos ou cirúrgicos. Também são permitidos produtos desinfetantes compostos por cloreto de didecildimetilamónio, carbonato de amónio quaternário ou produto enzimático neutro. (p. ex., neodisher® MediClean) também são permitidos.

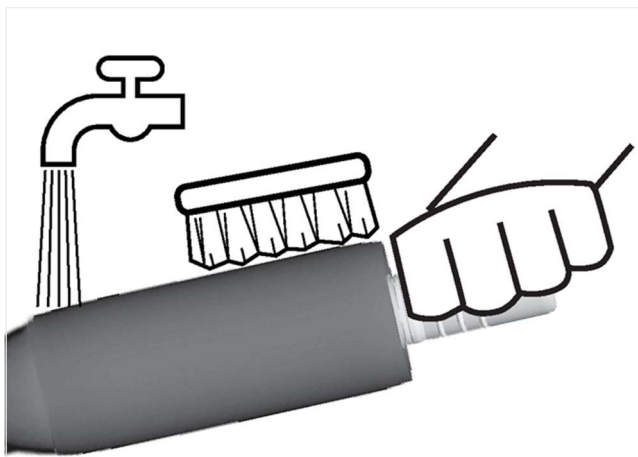


FIG. 7

5.2 Limpeza

⚠ ATENÇÃO

- Não mergulhe em líquido fisiológico (NaCl) nem utilize soluções salinas para manter o dispositivo húmido até ser limpo.
- Durante a limpeza, não submergir.
- Não utilize numa máquina de lavar-desinfetar nem num dispositivo de limpeza por ultrassons.
- Não pulverize nenhuma solução de limpeza no interior do motor.
- Os contatos do motor devem estar sempre limpos.

É necessário limpar a superfície exterior do motor para remover as impurezas, tal comose segue FIG. 7:

- Segure no motor pela peça de engate (nariz) e coloque-o sob água da rede local a 15 °C- 38 °C (59 °F- 100 °F), desde que a mesma tenha um pH entre 6,5 e 8,5 e um teor de cloro inferior a 100 mg/l. Se a água da rede local não cumprir estes requisitos, utilize água desmineralizada (desionizada).
- Com o auxílio de uma escova flexível e macia, limpe a superfície exterior do motor com os produtos de limpeza rcomendados.
- Evite a entrada de água no motor, quer através do nariz, quer através do conector do tubo flexí
- Secar as superfícies externas do motor com um pano umedecido com Spraynet®.

5.3 Esterilização

⚠ ATENÇÃO

- A qualidade da esterilização depende muito do estado de limpeza do dispositivo. Esterilizar apenas dispositivos perfeitamente limpos.
Para melhorar a eficácia da esterilização, certifique-se de que o motor está totalmente seco.
 - Não utilize outro procedimento de esterilização que não o abaixo indicado.
 - Utilize apenas ciclos de remoção de ar dinâmicos: ciclos de pré-vácuo ou esterilização através de vapor sob pressão (SFPP).
- Se as diretivas nacionais exigirem a esterilização do dispositivo, utilize apenas esterilizadores dinâmicos: não utilize um esterilizador a vapor com um sistema de deslocamento por gravidade. Tal como acontece com todos os instrumentos, após cada ciclo de esterilização, incluindo secagem, remova o dispositivo para evitar uma exposição excessiva ao calor, pois tal pode provocar corrosão.

5.3.1 Procedimento

1. Coloque o dispositivo numa embalagem homologada para a esterilização por vapor.
2. Esterilize utilizando vapor, seguindo o ciclo de remoção de ar dinâmico (ANSI/AAMI ST79, Secção 2.19), ou seja, remoção de ar através de evacuação forçada (ISO 17665-1, ISO/TS 17665-2) a 135 °C (275 °F), durante 3 minutos ou a 132 °C (269,6 °F) durante 4 minutos. Em jurisdições onde a esterilização por priões seja obrigatória, esterilize a 135 °C (275 °F) durante 18 minutos.

Os parâmetros recomendados para o ciclo de esterilização são:

- . A temperatura máxima na câmara da autoclave não excede os 137 °C (278,6 °F), ou seja, a temperatura nominal da autoclave está definida para 134 °C, (273,2 °F), 135 °C (275 °F) ou 135,5 °C (275 °F), tendo em conta a incerteza do esterilizador no que diz respeito à temperatura.
- . A duração máxima do intervalo à temperatura máxima de 137 °C (278,6 °F) está em conformidade com os requisitos nacionais relativos a esterilização por calor húmido e não excede 30 minutos.
- . A pressão absoluta na câmara do esterilizador encontra-se no intervalo entre 0,07 bar e 3,17 bar (1 psia a 46 psia).
- . A taxa de alteração da temperatura não excede 15 °C/min (59 °F/min), para aumento da temperatura, e -35 °C/min (-31 °F/min), para diminuição da temperatura.
- . A taxa de alteração da pressão não excede 0,45 bar/min (6,6 psia/min), para aumento da pressão, e -1,7 bar/min (-25 psia/min), para diminuição da pressão.
- . Não foram adicionados quaisquer reagentes químicos ou físicos ao vapor de água.

5.4 Embalagem e armazenamento

Condições de armazenamento



Intervalo de temperaturas:

0 °C - +40 °C (+32 °F - +104 °F)



Intervalo de humidade relativa:

10% - 80%



Intervalo de pressão de ar:

650 hPa - 1060 hPa



Manter afastado da chuva

O dispositivo deve ser guardado dentro da bolsa de esterilização num local seco e livre de poeiras. A temperatura não pode exceder os 55 °C (131 °F). Se o dispositivo não for utilizado durante 7 dias ou mais após a esterilização, retire o dispositivo da bolsa de esterilização e guarde-o na embalagem original. Se o dispositivo não for guardado numa bolsa de esterilização ou se a bolsa já não estiver esterilizada, limpe, seque e esterilize o dispositivo antes de utilizar o mesmo.

ATENÇÃO

Se o dispositivo médico tiver sido guardado refrigerado, deixe-o arrefecer à temperatura ambiente antes da respetiva utilização.

ATENÇÃO

Respeite a data de validade da bolsa de esterilização, que depende das condições de conservação e do tipo de embalagem.

5.5 Reparação

A Bien-Air Dental SA recomenda que o utilizador verifique ou faça a manutenção dos seus dispositivos dinâmicos após 5000 ciclos ou 5 anos.

O micromotor não pode ser reparado por profissional não credenciado: para todas as modificações e reparos, entre em contato com o seu fornecedor habitual ou com o centro de assistência técnica da Bien Air Dental.

ATENÇÃO

Nunca desmonte o dispositivo. Para quaisquer modificações ou reparações, contacte o seu fornecedor habitual ou o centro de assistência da Bien-Air Dental.

6 Transporte e descarte

6.1 Transporte

Condições de transporte



Intervalo de temperaturas:

-20 °C - +50 °C (-4 °F - +122 °F)



Intervalo de humidade relativa:

5% - 80%



Intervalo de pressão de ar:

650 hPa - 1060 hPa



Manter afastado da chuva

6.2 Descarte



O descarte e/ou reciclagem de materiais têm de ser efetuadas de acordo com a legislação em vigor.



O dispositivo tem de ser reciclado. Os equipamentos elétricos e eletrónicos podem conter substâncias perigosas para a saúde e para o ambiente. O utilizador tem de devolver o dispositivo ao seu revendedor ou contactar diretamente uma entidade autorizada para tratamento e recuperação deste tipo de equipamentos (Diretiva Europeia 2012/19/UE).

7 Informações gerais

7.1 Termos de garantia

Bien-Air Dental SA confere ao utilizador uma garantia contra qualquer defeito funcional, material ou de produção.

A duração da garantia é de:

- 36 meses a partir da data da nota fiscal.

Em caso de reclamação justificada, a Bien-Air Dental, ou o respetivo representante autorizado, assumirá as obrigações da empresa ao abrigo desta garantia, reparando ou substituindo o produto gratuitamente.

Quaisquer outras reclamações, independentemente da sua natureza, nomeadamente as reclamações de danos ou lesões e as consequências que resultem de:

- Desgaste excessivo
- Uso inadequado ou esporádico
- Não observância das instruções de utilização, montagem e manutenção
- Danos provocados por influências químicas, elétricas ou eletrolíticas invulgares
- Ligações incorretas de ar, água ou eletricidade



ATENÇÃO

A garantia considera-se nula ou inválida se os danos e respetivas consequências resultarem de intervenções incorretas ou de modificações do produto efetuadas por terceiros não autorizados pela Bien-Air Dental SA. Os pedidos de garantia apenas serão considerados se o produto estiver acompanhado por uma cópia da nota fiscal. As seguintes informações devem estar claramente indicadas: data de compra, referência do produto e número de série.

7.2 Referências

REF	Legenda
1600751-001	Micromotor MCX (com luz LED)
1600780-001	Micromotor MCX
1600756-001	Mangueira MCX, silicone cinzento
1600824-001	Mangueira B-MCX, silicone cinzento. Ligação de baioneta à unidade
1601081-001	Mangueira MCX-400, rotativa, silicone cinzento
1601096-001	Mangueira de c.l. MCX-400, rotativa, tampa longa, silicone cinzento
1600920-001	Mangueira MCX, comprimento especial (2,2m)
1601141-001	Mangueira MCX, 400°gf
1300967-010	O-ring
1600307-001	Caudalímetro para micromotores
1600036-006	Spraynet®, spray de limpeza 500 ml, caixa com 6 latas

 Bien-Air Dental SA
Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Switzerland
Tel. +41 (0)32 344 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91
dental@bienair.com
Other addresses available at
www.bienair.com

EC	REP
----	-----

 Bien-Air Europe Sàrl
19-21 rue du 8 mai 1945
94110 Arcueil France