

iChiropro iChiropro Surgery

中文 快速入门指南。



套装 iChiropro 编号1700439-001



编号1600784-001



编号 1303393-001



编号 1600755-001



编号160606-001



编号 1600631-001



编号 1500984-010



编号 1308761-001




编号 1308994-001



编号 1501746-002



编号 1501575-001

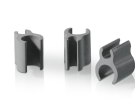

编号 1303711-010

套装 iChiropro 编号1700440-001



编号 1700439-001



编号 1600692-001

套装 iChiropro 编号1700485-001



编号 1600883-001



编号 1303393-001



编号 1600755-001



编号 1600881-001



编号 1600631-001



编号 1501738-010



编号 1308761-001



编号 1308994-001



编号 1501746-002



编号 1303711-010

套装 iChiropro 编号1700484-001



编号 1700485-001



编号 1600436-001

*套装僅在美國和加拿大有售

选项



编号 1301575-001



编号 1501746-010



编号 1501746-002



编号 1501317-100



编号 1305435-001



编号 1501621-010



编号 1307312-010



编号 1500984-010



编号 1501738-010




编号 1501635-010



编号 1308761-001



编号 1308994-001

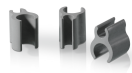

编号 1303711-010

在对任何病人进行操作之前，必须查阅使用说明，特别是“警告和注意事项”一章。使用说明可在 iChiropro 应用程序中找到（进入“信息”页面，点击“用户手册”）。

1 安装



图 1



图 2



图 3



图 4



图 5

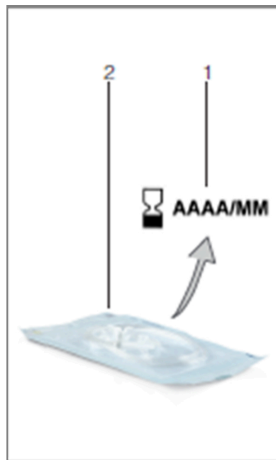


图 6

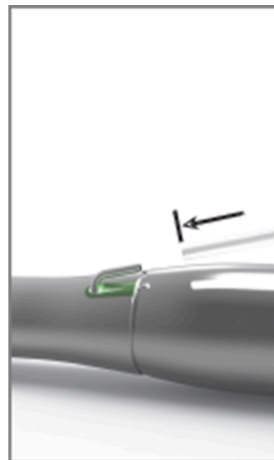


图 7



图 8



图 9



图 10



图 11



图 12

1.1 下载 iChiropro 应用程序

- A. 打开 App Store©，点击 iPad 上的相应图标。
- B. 点击搜索，找到 iChiropro 应用程序。
- C. 安装由 Bien-Air Dental 设计的 iChiropro 应用程序。

有关最新 iPad 型号的兼容性，请参阅 www.bienair.com。
配备 USB-C 接口的 iPad 机型仅与 2.6.1 版应用程序兼容。

请注意：在打开 App Store © 之前，iPad 必须正确连接到互联网；有关 iPad 的正确使用方法，请参阅 Apple 用户指南。

1.2 安装 iChiropro 系统

- A. 如有必要，使用十字螺丝刀更换已安装的 iPad 适配器。

图 1

用所需的适配器替换 iPad 适配器，注意在插入过程中不要用力，以免损坏连接器。

请注意：为了安全地将 iPad 转接器插入设备，在到达行程末端之前，请将转接器中心向设备方向轻压，使连接器与转接器上的孔对准。一旦连接器找到孔，就完成插入，直到适配器完全啮合。

- B. 将 iChiropro 放置在能够承受其重量的平面上。

⚠ 注意事项

它可以放在桌子上、手推车上或任何其他表面上，但在任何情况下都不能放在地板上。

图 2

- C. 保险丝盒可以用螺丝刀打开。100 - 240 VAC = 保险丝 T4.0AH 250 VAC 编号1307312-010。更换保险丝
- D. 将电源线 (1) 连接到连接器 (2)。

请注意：设备由主电源供电 (100 - 240 伏交流)。

⚠ 注意事项

电源插头是在出现问题时用于断开连接的装置，必须始终方便使用。

图 3

- E. 将踏板电缆连接到后面板上的输出端，通过连接器上的索引针引导连接器和插头。

⚠ 注意事项

不要抬起握着连接线的踏板。

要断开踏板电缆，请拉电缆插座连接器 (1)。

在断开电缆插座之前，不要拉电缆 (2)。

图 4

- F. 将 MX-i 微机电缆连接到电机输出端，通过连接器上的分度插针引导连接器和插头。

图 5

G. 将支架对准并安装到控制台后部提供的外壳上，然后悬挂烧瓶或瓶子。

图 6

H. 检查包装是否完整，以及标签 (1) 上灌溉管的有效期。

⚠ 警告

该医疗设备只能与 Bien-Air Dental 提供的管路一起使用，以确保无故障运行。这些管路是一次性无菌使用的。重复使用可能会对患者造成微生物污染。

I. 从袋中取出一次性无菌灌洗管 (2)。

图 7

J. 将灌洗管的软管连接到手机或弯手机的喷管上。

图 8

K. 将蠕动盒 (1) 装入蠕动泵 (2)。检查供片盒是否正确夹紧。

图 9

L. 关闭泵盖 (3)。如果关闭时遇到阻力，请再次打开泵盖并检查供料盒的位置是否正确。泵盖正确关闭后，用户应听到咔哒声。

⚠ 注意事项

盖子打开时不要运行泵。

⚠ 警告

挤压风险！

图 10

M. 取下保护帽后，用灌注管的尖头在生理液体烧瓶的盖子上穿孔。

图 11

N. 使用连接环 (1) 编号1303711-010 将灌溉管路连接到发动机电缆上。

1.3 在 iChiropro 上安装 iPad

O. 从保护袋中取出 iPad 的一次性无菌保护膜，贴在屏幕上。请参考保护袋背面的说明。

图 12

P. 将 iPad 与 iChiropro 连接，沿适配器小心滑动，注意不要用力，以免损坏连接器。

请注意： 对于某些 iPad 型号，可在 iPad 设置中激活电池节省选项。在这种情况下，电池电量将受到相应限制，因此无法达到 100% 电量。

1.4 开启/关闭程序

通过 iPad 和 iChiropro 上的主开关，可以完全安全地开关设备。

 **Bien-Air Dental SA**

Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Switzerland
Tel. +41 (0)32 344 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91
dental@bienair.com

Other addresses available at
www.bienair.com

EC REP **Bien-Air Europe Sàrl**

19-21 rue du 8 mai 1945
94110 Arcueil
France