

iChiropro iChiropro Surgery

РУС КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.



Набор iChiropro APT 1700439-001



APT. 1600784-001



APT. 1303393-001



APT. 1600755-001



APT. 160606-001



APT. 1600631-001



APT. 1500984-010



APT. 1308761-001



APT. 1308994-001



APT. 1501746-002



APT. 1501575-001



APT. 1303711-010

Набор iChiropro APT 1700440-001



APT. 1700439-001



APT. 1600692-001

Набор iChiropro APT 1700485-001



APT. 1600883-001



APT. 1303393-001



APT. 1600755-001



APT. 1600881-001



APT. 1600631-001



APT. 1501738-010



APT. 1308761-001



APT. 1308994-001



APT. 1501746-002



APT. 1303711-010

Набор iChiropro APT 1700484-001



APT. 1700485-001



APT. 1600436-001

** Набор доступен только в США и Канаде*

Опции



APT. 1301575-001



APT. 1501746-010



APT. 1501746-002



APT. 1501317-100



APT. 1305435-001



APT. 1501621-010



APT. 1307312-010



APT. 1500984-010



APT. 1501738-010



APT. 1501635-010



APT. 1308761-001



APT. 1308994-001



APT. 1303711-010

Перед тем, как оперировать пациентов, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и, в частности, с главой "Предупреждения и предостережения". Инструкции по применению находятся в приложении iChiropro (перейдите на страницу "Информация" и нажмите "Руководство пользователя").


1 Установка



ФИГ. 1



ФИГ. 2

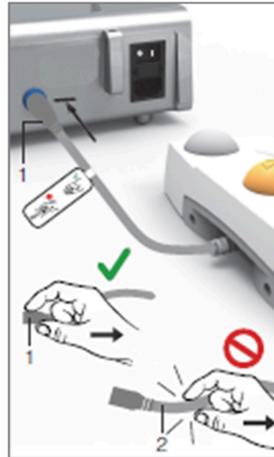


ФИГ. 3




ФИГ. 4



ФИГ. 5

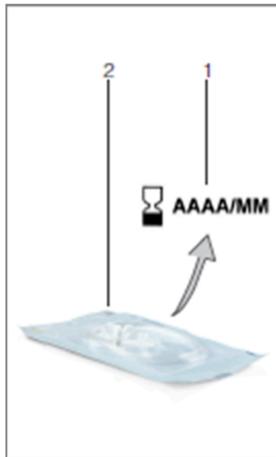

ФИГ. 6

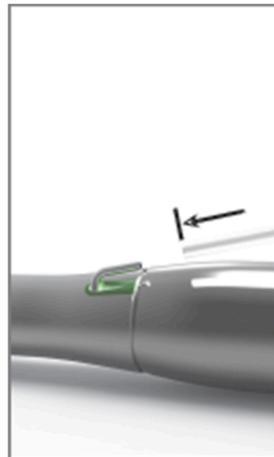

ФИГ. 7



ФИГ. 8



ФИГ. 9



ФИГ. 10



ФИГ. 11



ФИГ. 12

1.1 Загрузите приложение iChiropro

- A. Откройте App Store®, нажмите соответствующую иконку на iPad.
- B. Нажмите Поиск, чтобы найти приложение iChiropro.
- C. Установите приложение iChiropro, разработанное компанией Bien-Air Dental.

Пожалуйста, обратитесь к сайту www.bienair.com, чтобы узнать о совместимости моделей iPad. Модели iPad с разъемом USB-C совместимы только с версией приложения 2.6.1.

Примечание : Перед открытием App Store © iPad должен быть правильно подключен к Интернету; обратитесь к руководству пользователя Apple, чтобы узнать, как правильно использовать iPad.

1.2 Установите систему iChiropro

- A. При необходимости воспользуйтесь крестовой отверткой, чтобы заменить установленный адаптер iPad.

РИС. 1

Замените адаптер iPad на нужный, обращая внимание на то, чтобы не давить на адаптер при вставке, чтобы не повредить разъем.

Примечание : Для безопасной установки адаптера iPad на устройство, перед тем как дойти до конца хода, слегка надавите на центр адаптера по направлению к устройству, чтобы совместить коннектор с отверстием, расположенным на самом адаптере. Как только коннектор окажется в отверстии, завершите вставку до полного зацепления адаптера.

- B. Поместите iChiropro на ровную поверхность, способную выдержать его вес.

⚠ ВНИМАНИЕ

Он может располагаться на столе, на тележке или любой другой поверхности, но ни в коем случае не на полу.

РИС. 2

- C. Блок предохранителей можно открыть с помощью отвертки. 100 - 240 В переменного тока = предохранитель T4.0AH 250 В переменного тока REF 1307312-010. Чтобы заменить предохранитель.
- D. Подключите кабель питания (1) к разъему (2).

Примечание : Оборудование питается от электросети (100 - 240 В переменного тока).

⚠ ВНИМАНИЕ

Вилка питания - это устройство, используемое для отключения в случае возникновения проблем, оно всегда должно быть легкодоступным.

РИС. 3

- E. Подключите кабель педали к выходу, расположенному на задней панели, направляя разъем и штекер за указательный штырек на разъеме.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не поднимайте педаль, держа ее за соединительный кабель.
Чтобы отсоединить кабель педали, потяните за разъем кабельного гнезда (1).
Не тяните кабель (2), не отсоединив перед этим гнездо кабеля.

РИС. 4

- F. Подключите кабель микромотора MХ-і к выходу мотора, направляя разъем и штекер за указательный контакт на разъеме.

РИС. 5

Г. Выровняйте и прикрепите кронштейн к корпусу, расположенному на задней части консоли, и подвесьте колбу или бутылку.

РИС. 6

Н. Проверьте целостность упаковки, а также срок годности ирригатора на этикетке (1).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для обеспечения бесперебойной работы медицинского прибора его следует использовать только с линиями, поставляемыми компанией Bien-Air Dental. Эти линии стерильны и предназначены для однократного использования. Повторное использование может привести к микробиологическому заражению пациента.

И. Извлеките одноразовую стерильную ирригационную линию (2) из чехла.

РИС. 7

Ж. Подсоедините гибкий шланг ирригационной линии к распылительной трубке наконечника или углового наконечника.

РИС. 8

К. Установите перистальтическую кассету (1) в перистальтический насос (2). Проверьте, правильно ли зажата кассета.

РИС. 9

Л. Закройте крышку насоса (3). Если при закрытии возникает сопротивление, откройте крышку снова и проверьте правильность расположения кассеты. Когда крышка закрыта правильно, пользователь должен услышать щелчок.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не запускайте насос при открытой крышке.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность защемления!

РИС. 10

М. Проколите крышку колбы с физиологической жидкостью заостренным концом ирригационной линии после снятия защитного колпачка.

РИС. 11

Н. Закрепите оросительную линию на кабеле мотора с помощью крепежных хомутов (1) REF 1303711-010.

1.3 Установка iPad на iChiropro

О. Извлеките одноразовый стерильный защитный лист для iPad из чехла и наклейте его на экран. Обратитесь к инструкции на обратной стороне чехла.

РИС. 12

Р. Подключите iPad к iChiropro, аккуратно сдвинув его вдоль адаптера, стараясь не надавливать, чтобы не повредить разъем.

Примечание : Для некоторых моделей iPad опции экономии заряда батареи могут быть активированы в Настройках iPad. В этом случае уровень заряда батареи будет ограничен соответствующим образом и, следовательно, не достигнет 100%.

1.4 Процедура включения/выключения

Устройство можно включать и выключать в полной безопасности с помощью главного выключателя на iPad и iChiropro.

 **Bien-Air Dental SA**

Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Switzerland
Tel. +41 (0)32 344 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91
dental@bienair.com

Other addresses available at
www.bienair.com

EC REP **Bien-Air Europe Sàrl**

19-21 rue du 8 mai 1945
94110 Arcueil
France